

## Fotografare / Filmare

Seguire le seguenti procedure

### 1 Inserire i dati del paziente (optional)


Per maggiori dettagli, vedere pagina 20 del manuale d'uso.

Vi sono 3 possibilità per registrare i dati del paziente: inserire il numero ID del paziente, scansionare un codice QR (richiede un software di terzi) o fotografare la cartella clinica.

### 2 Selezionare la modalità di scatto

Premere il tasto F1 o **[Mode]**, per visualizzare tutte le modalità preinstallate. Selezionare la modalità ottimale per ogni scopo.



Ulteriori informazioni sulle singole modalità di scatto sono riportate nella parte destra. È possibile modificare le impostazioni preinstallate della fotocamera e memorizzarle per uso futuro come modalità personalizzate. Informazioni a riguardo si trovano a pag. 24 del manuale d'uso.

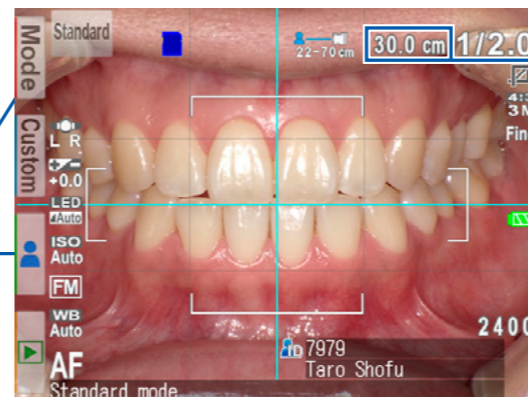

### 3 Selezionare il rapporto di ingrandimento

Regolare il rapporto di ingrandimento ruotando il selettore (non è possibile modificare il rapporto di ingrandimento toccando lo schermo).


Nella modalità filmato ruotando il selettore si seleziona la distanza focale.

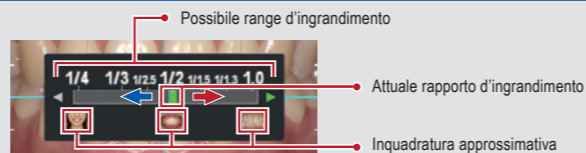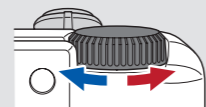

## Fotografare

### 4 Impostare la distanza di messa a fuoco

Distanza di messa a fuoco ottimale (varia a seconda dell'ingrandimento selezionato)

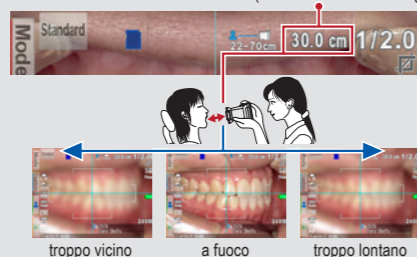


Basandosi sulla distanza di messa a fuoco ottimale visualizzata in alto sullo schermo, regolare la distanza tra fotocamera e soggetto da fotografare. Cambiare la posizione della fotocamera fino a quando il soggetto appare nitido sullo schermo.

#### Consigli Per fotografare in modalità viso (Face)

Quando sullo schermo compare "▲ UP", tenere la fotocamera nel senso indicato dal simbolo ▲.

### 4 Registrazione filmato

Premere il pulsante di scatto per mettere a fuoco. Dopo aver messo a fuoco il soggetto da filmare, premere il tasto SET, per iniziare la registrazione del filmato. La messa a fuoco viene regolata automaticamente al variare della distanza e della messa a fuoco. Premere il tasto SET per terminare la registrazione del filmato. La durata massima di registrazione è di 10 min per filmato.

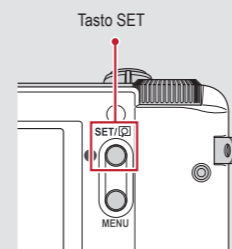


### 5 Messa a fuoco e scatto

Premere il pulsante di scatto fino a metà per mettere a fuoco. Se la messa a fuoco è corretta, appare in alto a destra sullo schermo un indicatore di messa a fuoco verde. Premere quindi il pulsante di scatto fino in fondo per eseguire la foto.



#### Consigli Autofocus Spot

È possibile mettere a fuoco al di fuori dell'area di autofocus toccando direttamente sullo schermo l'area che si desidera mettere a fuoco (modalità Spot AF). Per ritornare alla modalità AF standard, premere per alcuni secondi sull'area che era stata messa a fuoco in modalità spot.

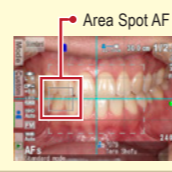

## Filmare

Se mentre si sta scattando si preme inavvertitamente qualsiasi tasto e compare un altro menu, premere il pulsante di scatto fino a metà per ritornare alla modalità di scatto.



EyeSpecial C-V può inviare al vostro computer tramite Wi-Fi le immagini acquisite. Per le informazioni sull'attivazione della funzione Wi-Fi consultare il manuale d'uso a pag. 42.

## Modalità di scatto

		<b>Standard</b> Per la fotografia intraorale standard			<b>Basso riflesso</b> Per fotografare dettagli di denti anteriori, modelli di lavoro e restauri indiretti
		<b>Chirurgia</b> Per la fotografia intraorale a distanza			<b>Sbiancamento</b> Per confrontare il colore prima e dopo lo sbiancamento
		<b>Specchio</b> Per la fotografia intraorale con l'uso di uno specchio. L'immagine può essere successivamente riflessa.			<b>Tele-macro</b> Per fotografare dettagli di denti anteriori, dei restauri indiretti o dei modelli di lavoro con un rapporto d'ingrandimento
		<b>Viso</b> Per foto del viso, ritratti a mezzo busto o a corpo intero			<b>Esclusione colore</b> Per un'ottimale presa del colore è possibile nascondere il colore della gengiva.
		<b>Filmato</b> Per registrare filmati			

## Capacità di memorizzazione della scheda di memoria

Il numero massimo di immagini che possono essere memorizzate sulla scheda SDHC da 16 GB in dotazione è di ca. 9.999. Dopo aver superato 5.000 scatti, quando si accende la fotocamera compare sullo schermo il messaggio di sinistra. Quando si raggiungono 9.999 scatti, compare il messaggio di destra e non si possono più fare foto.

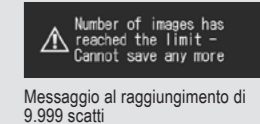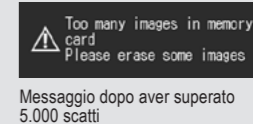

## Usare SureFile per una migliore organizzazione dei dati

Per semplificare la gestione dei file e la selezione delle immagini, SHOFU ha sviluppato un proprio software chiamato "SureFile". Per scaricare questo software gratuito e per maggiori informazioni consultare: [www.shofu.co.jp/surefile/indexe.html](http://www.shofu.co.jp/surefile/indexe.html)

Per usare SureFile, la scheda SD deve essere stata formattata in precedenza con la fotocamera EyeSpecial C-V:

- 1 Inserire nell'apposito slot la scheda SD
- 2 Premere il tasto MENU
- 3 Premere il tasto F4
- 4 Selezionare la scheda 5
- 5 Selezionare "Format SD card" (Formattare scheda SD)

Per maggiori dettagli, vedere pag. 41 del manuale d'uso.

## Visualizzare le immagini

In modalità di scatto, toccare il tasto per passare alla modalità riproduzione. Viene visualizzata l'ultima immagine ripresa.

Ruotare il selettore per scorrere le immagini indietro e in avanti.

alla modalità riproduzione

alla modalità di scatto

Modalità di scatto

Modalità riproduzione (Foto)

Modalità riproduzione (Filmato)

Immagine precedente

Immagine successiva

### Ingrandimento

Indietro

Ingrandisci l'immagine

Riduci l'immagine

= Per visualizzare altre parti della foto

Toccano in qualsiasi punto, escluse le frecce di scorrimento, l'area toccata viene centrata sullo schermo.

### Anteprima

Per visualizzare una singola immagine, selezionarla toccando lo schermo.

Indietro

Ruotando il selettore è possibile spostare la cornice blu e selezionare un'altra immagine.

### Cancellazione

Se si desidera cancellare l'immagine, premere "OK" per procedere, oppure premere "Cancel" per annullare la cancellazione.

Erase this image?

OK Cancel

## Funzioni di elaborazione (Foto)

1 **Disegno sulle immagini**  
Disegnare linee sulle immagini toccando lo schermo.

2 **Rotazione delle immagini**  
Le immagini possono essere ruotate di 90°.

3 **Protezione delle immagini**  
Proteggere le immagini per evitare la cancellazione accidentale o modifiche indesiderate.

Per maggiori dettagli, vedere pag. 38/39 del manuale d'uso.

## Funzioni durante la riproduzione di un filmato

**Riproduzione di un filmato**  
Selezionare un fotogramma del filmato. Premere il simbolo "Play" al centro dell'immagine o premere il tasto SET, per riprodurre un filmato.

**Funzioni durante la riproduzione di un filmato**

Stop

Volume più alto / più basso

Rewind (indietro) Pausa Fast Forward (avanti veloce)

La riproduzione dei filmati può essere comandata o premendo i tasti della fotocamera oppure ruotando il selettore.

Per maggiori dettagli, vedere pag. 40 del manuale d'uso.

## Inserire batterie e scheda di memoria SD

### Installare le batterie

Batterie compatibili: 4x AA  
(Batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro o batterie alcaline)

Aprire il coperchio

Inserire le batterie

Chiudere il coperchio

Assicurarsi di posizionare correttamente i poli.

Spingere indietro il coperchio, tenendo premuto qui.

### Inserire la scheda di memoria SD

Schede di memoria SD compatibili:

SD fino a 2 GB

SD da 4 a 32 GB

SDXC da 64 a 512 GB

L'etichetta della scheda deve essere rivolta verso la parte anteriore della fotocamera.

## Riproduzione di filmati visualizzazione di immagini con il cavo HDMI

- Collegare la fotocamera con il cavo HDMI al televisore o ad un altro dispositivo di riproduzione.
  - Selezionare la modalità di riproduzione e premere il tasto MENU. Poi selezionare il tasto "HDMI".
  - Viene visualizzata la modalità di riproduzione. Usare i tasti della fotocamera o il selettore per comandare. Lo schermo della fotocamera è oscurato e il filmato / l'immagine vengono riprodotti sul televisore o su un altro dispositivo connesso con il cavo HDMI, perciò non si può utilizzare lo schermo LCD (Touch screen). Alcune funzioni, come disegnare o ruotare le immagini, non sono disponibili.
  - Per terminare la riproduzione tramite HDMI, premere il tasto MENU. Sullo schermo del dispositivo di riproduzione compare la finestra di dialogo qui a destra. Premere il tasto SET della fotocamera e selezionare "LCD". Non appena ricompare lo schermo della fotocamera, è possibile scollegare il cavo HDMI.
- I cavi HDMI comunemente disponibili in commercio sono compatibili con EyeSpecial C-V. Leggere il nostro consiglio a pag. 37 del manuale d'uso.

Edit

Draw

Rotate

Protect

HDMI

Edit

Draw

Rotate

Protect

LCD

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un marchio registrato dell'Administrator, Inc.