

EyeSpecial C-V

SHOFU Cross Polarizer

ES

Lea las "Instrucciones importantes sobre seguridad" para EyeSpecial C-V antes de usar este filtro de polarización cruzada.

Este producto es exclusivamente para la cámara EyeSpecial C-IV y modelos posteriores. No es compatible con los modelos anteriores EyeSpecial C-II y C-III.

Uso previsto

Para el resaltado claro de los contornos de la estructura superficial o interna de los dientes naturales, como la estructura de los mamelones o las fisuras, que son difícilmente reproducibles con una fotografía "normal".

Preparación

Active el modo para polarización cruzada antes de utilizar el filtro por primera vez (la activación solo es necesario realizarla una vez).

1. Activación del modo de polarización cruzada

Escanee el código QR de más abajo para activar el modo de polarización cruzada. Cuando aparezca el mensaje "Change the optional setting?" (¿Cambiar el ajuste opcional?), pulse "OK".



Código QR para activar el modo de polarización cruzada

2. Guardado como modo definido por el usuario

Escanee el código QR de más abajo para guardar el modo de polarización cruzada como modo definido por el usuario. Cuando aparezca el mensaje "Select the number" (Seleccionar el número), seleccione uno de los tres ajustes definidos por el usuario. Asegúrese de que la cámara está en modo de disparo (uno de los 9 modos preestablecidos), ya que en el modo definido por el usuario no se pueden escanear códigos QR.



para EyeSpecial C-IV



para EyeSpecial C-V

Códigos QR para guardar en modo definido por el usuario

Toma de fotografías

1. Selección del modo definido por el usuario

Antes de disparar, asegúrese de que el icono del modo definido por el usuario correspondiente aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.




2. Colocación de la lente macro

Coloque la lente macro en el objetivo de la cámara y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijada.

3. Colocación del filtro de polarización cruzada

Coloque cuidadosamente el SHOFU Cross Polarizer en la lente macro como se muestra hasta que encaje con un clic audible.

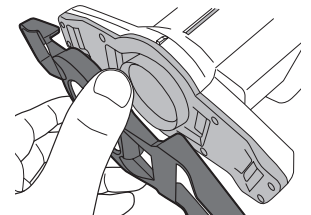


4. Toma de fotografías

El procedimiento para tomar fotografías es el mismo que en el modo Telemacro. Consulte el manual del usuario (User manual) de la cámara.

5. Retirada del filtro de polarización cruzada


Para quitar de nuevo el filtro polarizador, levante con cuidado las pestañas de ambos lados de la cámara y tire del filtro hacia afuera.

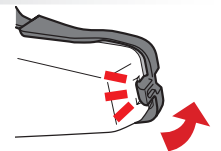

Escaneo de códigos QR



1 En el modo de disparo, pulse **Custom** o la tecla F2

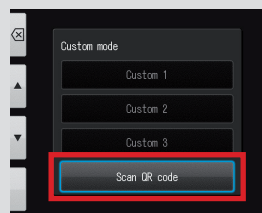

2 Seleccione "Scan QR code" (Escanear código QR)



3 Pulse el disparador para comenzar a escanear



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com