

EyeSpecial C-V


Istruzioni importanti per la sicurezza

IT

Per le informazioni più aggiornate sulla fotocamera EyeSpecial C-V, consultare il sito www.shofu.it.

Contenuto della confezione

Alla prima apertura della confezione di EyeSpecial C-V, controllare che siano presenti tutti i componenti illustrati di seguito. Se si riscontra la mancanza di qualche elemento, contattare il proprio rivenditore SHOFU il più presto possibile.

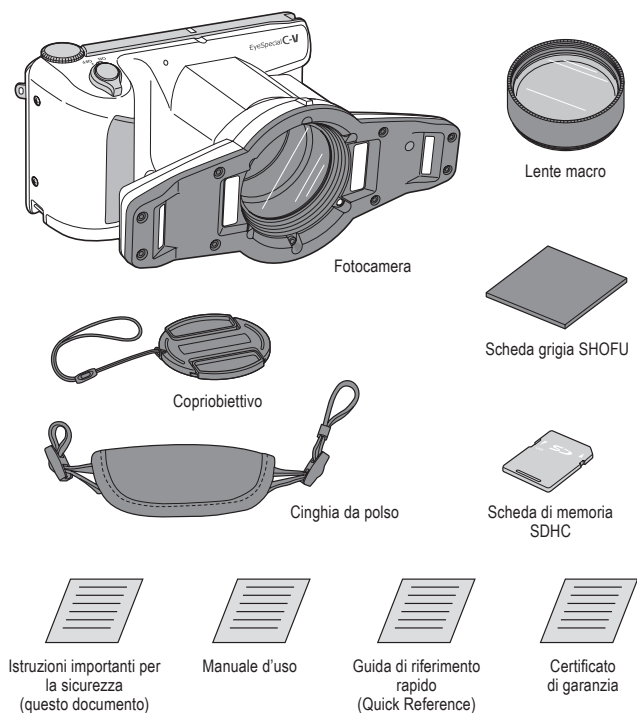

Accessori opzionali

Per utilizzare questa fotocamera sono necessari i seguenti accessori opzionali, venduti separatamente:



- Batterie AA: batterie alcaline / batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro (NiMH)
- Supporti di memorizzazione: scheda SD/scheda SDHC/scheda SDXC
Se il vostro computer non è provvisto di slot SD/SDHC/SDXC, acquistare un lettore di schede SD/SDHC/SDXC esterno per poter trasferire i dati dalla scheda di memoria al computer.
- Cavo HDMI (HDMI, tipo A ↔ Micro-HDMI, tipo D)
Consiglio (nel caso in cui il dispositivo collegato abbia un connettore HDMI di tipo A): CAC-HD14EU15BK di ELECOM

Indicazioni di sicurezza

Per usare il prodotto in sicurezza, leggere attentamente quanto segue.


Descrizione dei simboli di avvertenza e attenzione

Le indicazioni di sicurezza sono rappresentate utilizzando i seguenti due simboli e sono importanti per prevenire incidenti con potenziali lesioni gravi o mortali. Per utilizzare il dispositivo in sicurezza, è necessario comprendere il significato di questi simboli.

 Avvertenza	Il simbolo "Avvertenza" indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare decesso o lesioni gravi.
 Attenzione	Il simbolo "Attenzione" indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare lesioni minori o danni alle cose.

Ulteriori note e simboli

Ulteriori note e simboli utilizzati nel manuale d'uso sono illustrati di seguito:

 **Nota** Indica un potenziale malfunzionamento che potrebbe verificarsi se quanto descritto viene ignorato.

 **Info** Spiegazione supplementare per facilitare l'utilizzo della fotocamera.

Uso dell'apparecchio

Avvertenza

- **Se la fotocamera si surriscalda, emette odore di bruciato, produce fumo o presenta un funzionamento anomalo di qualsiasi tipo, sospendere immediatamente l'uso e rimuovere le batterie. Anche le batterie potrebbero essere surriscaldate: fare attenzione a non scottarsi quando si rimuovono.**
Se si ignorano queste avvertenze e si continua l'uso, potrebbero verificarsi scosse elettriche, ustioni e combustione spontanea. Contattare immediatamente il proprio rivenditore SHOFU per la riparazione.
- **Se i componenti interni della fotocamera vengono esposti a causa di una caduta o di danni subiti, sospendere immediatamente l'uso della fotocamera e rimuovere le batterie, facendo attenzione a non toccare le parti esposte.**
Il flash è ad alta tensione e potrebbe provocare scosse elettriche. Se si ignorano queste avvertenze e si continua l'uso, possono verificarsi scosse elettriche, ustioni o principio d'incendio. Contattare il proprio rivenditore SHOFU per l'assistenza tecnica.
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
Prestare la massima cautela quando si usa questa fotocamera vicino a bambini, per evitare incidenti o lesioni.

- **Non smontare mai, né tentare di riparare o aggiustare la fotocamera.**
Alcune parti di questa fotocamera sono ad alta tensione. Se si toccano i componenti interni, si potrebbero causare scosse elettriche. Qualsiasi manipolazione non corretta potrebbe anche causare malfunzionamento della fotocamera e provocare lesioni, scosse elettriche o principio d'incendio. Se sono necessarie riparazioni, contattare il proprio rivenditore SHOFU.
- **Non far scattare il flash nelle immediate vicinanze degli occhi. Se si utilizza il flash vicino agli occhi, usare una protezione per gli occhi.**
L'esposizione alla luce intensa prodotta dal flash può causare danni alla vista.
- **Se un corpo estraneo (metallo, liquido, polvere) penetra all'interno della fotocamera, sospenderne immediatamente l'uso e rimuovere le batterie.**
Se si continua ad usare la fotocamera, potrebbero verificarsi scosse elettriche o principio d'incendio. Rivolgersi al rivenditore SHOFU per avere ulteriore assistenza.
- **Non usare questa fotocamera in spazi ristretti, quali ad esempio borse, scatole o cassette.**
L'insufficiente dispersione del calore potrebbe causare surriscaldamento o principio d'incendio.
- **Non usare questa fotocamera in luoghi dove può bagnarsi facilmente, ad esempio vicino ad un lavello, lavandino o serbatoio d'acqua. Non mettere sopra la fotocamera nessun oggetto contenente liquidi.**
Possono verificarsi scosse elettriche o principio d'incendio.
- **Non usare questa fotocamera in luoghi in cui sono presenti gas altamente combustibili o benzina, benzene, diluenti.**
Si potrebbero causare esplosioni o principio d'incendio.
- **Non utilizzare la fotocamera in aereo o in altri luoghi dove è limitato o vietato l'uso di LAN senza fili. In caso contrario potrebbero verificarsi incidenti.**

Attenzione

- **Se si usa questa fotocamera per un lungo periodo di tempo, evitare di tenerla a contatto con la cute.**
Il corpo della fotocamera diventa molto caldo e potrebbe causare scottature.
- **Non rimuovere le batterie e la scheda SD subito dopo un lungo periodo di uso continuato.**
Le batterie e la scheda SD possono diventare molto calde durante l'uso. Toccando le batterie e la scheda, si potrebbero causare ustioni cutanee. Spegnerla la fotocamera e attendere che si raffreddi.
- **Non coprire il flash con le dita o altri oggetti mentre viene usato.**
Il flash genera calore e potrebbe causare ustioni.
- **Non premere eccessivamente sul display a cristalli liquidi, né esercitare una forza eccessiva senza motivo.**
In questo modo lo schermo potrebbe rompersi e provocare lesioni. Se il liquido viene a contatto con la cute, sciacquare immediatamente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua abbondante e consultare il medico.
- **Maneggiare la fotocamera e gli accessori con delicatezza.**
In caso contrario si potrebbero provocare danni o lesioni.
- **Usare sempre la cinghia da polso o una tracolla.**
- **La cinghia da polso deve essere controllata periodicamente per verificare che non sia allentata o logorata.**
Se si ignorano eventuali anomalie e si continua ad usare la fotocamera, possono verificarsi danni o lesioni.

Manutenzione e conservazione

Avvertenza

- **Gli accessori piccoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini, per evitare che vengano inghiottiti accidentalmente.**
Se inghiottiti, consultare subito un medico.
- **Non usare soluzioni infiammabili quali ad esempio il benzene o diluenti per pulire questa fotocamera.**
Si potrebbero causare esplosioni o principio d'incendio.

Attenzione

- **Evitare di usare o conservare questa fotocamera (incluse le batterie) sotto la luce diretta del sole, in condizioni di temperatura e umidità elevate o vicino al fuoco. Evitare anche di usarla e conservarla in luoghi dove si generano gas corrosivi, dove vi sono forti oscillazioni di temperatura, in presenza di molta polvere e olio, dove viene generata molta elettricità statica o vicino ad apparecchi che producono forte magnetismo o onde elettromagnetiche.**
Ciò potrebbe causare difetti, deformazione della fotocamera, perdita del liquido delle batterie, produzione di calore, esplosione, principio d'incendio o lesioni.

Batterie

Avvertenza

Rischio di esplosione

- **Se si inseriscono batterie diverse da quelle indicate, si possono causare esplosioni, shock elettrici o principio d'incendio. Utilizzare esclusivamente le batterie indicate sopra. Non usare batterie difettose o deformate.**
- **Lo smaltimento delle batterie con fiamme libere o in una stufa e lo schiacciamento meccanico o il taglio dell'involucro possono causare esplosioni, shock elettrici o principio d'incendio. Non gettare mai le batterie nel fuoco o in una stufa. Non tentare di schiacciare o di tagliare le batterie.**

Rischio di esplosione o fuoriuscita di liquido dalle batterie

- **L'utilizzo, la conservazione o il trasporto di batterie con temperature estremamente alte o basse possono causare esplosioni, la fuoriuscita del liquido dalle batterie, shock elettrici o principio d'incendio. Non utilizzare, conservare o trasportare le batterie con temperature estremamente alte o basse.**
- **L'utilizzo, la conservazione o il trasporto delle batterie ad altitudini elevate con bassa pressione possono causare esplosioni, la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili, shock elettrici o principio d'incendio. Non utilizzare, conservare o trasportare le batterie ad altitudini elevate con bassa pressione.**
- **Lasciare le batterie in un ambiente con temperature estremamente elevate può causare esplosioni, la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili, shock elettrici o principio d'incendio. Non lasciare le batterie in luoghi con temperature estremamente elevate.**
- **Lasciare le batterie in un ambiente con una pressione estremamente bassa può causare esplosioni, la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili, shock elettrici o principio d'incendio. Non lasciare le batterie in luoghi con una pressione estremamente bassa.**



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

www.shofu.com