

BEAUTIFIL Flow Plus

HIBRIDNI MATERIJAL U ŠPRICU ZA RESTAURACIJE U FRONTALNOJ I BOČNOJ REGIJI




JAK KAO HIBRIDNI-KOMPOZIT...


BEAUTIFIL II je poseban sistem za restauracije, prepoznatljiv po izvanrednim osobinama modelovanja i difuznoj transmisiji svetlosti, koja je analogna gleđi i dentinu. Patentirana filer tehnologija omogućava otpuštanje i primanje fluorida.

BEAUTIFIL Flow Plus je sledeći korak u razvoju restaurativnih materijala i povezuje osobine tečnog kompozita sa osobinama hibridnog kompozita, poput čvrstoće, dugotrajnosti i estetike.

BEAUTIFIL Flow Plus je pogodan za svaku indikaciju – uključujući i okluzalne površine i aproksimalne ivice. Sa poboljšanim upotrebnim osobinama, koje dozvoljavaju aplikaciju direktno iz šprica, restauracija bočnih zuba nikada nije bila jednostavnija. Dodatna prednost BEAUTIFIL Flow Plus-a da oslobađa i prima fluoride i njegova otpornost na kolonizaciju bakterijama, čini ga idealnim za prevenciju od sekundarnog karijesa.

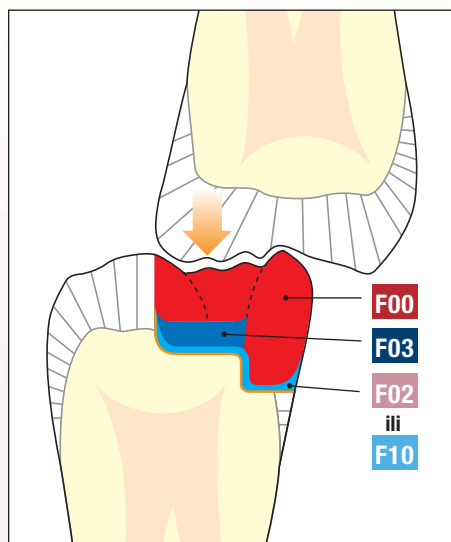


Okluzalni pritisak

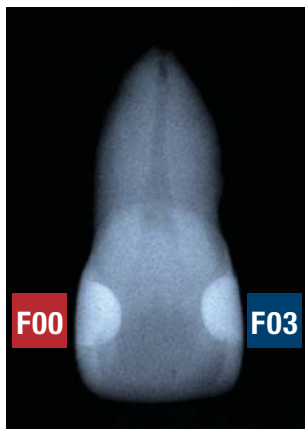

Plus-prednosti za Vas

- Restauracije klase I do klase V
- Pogodan za okluzalne površine
- Jednostavna i laka aplikacija iz šprica
- Kameleon efekat sa prirodnom estetikom
- Stalno oslobađanje i primanje fluorida
- Izvanredno rendgen kontrastan

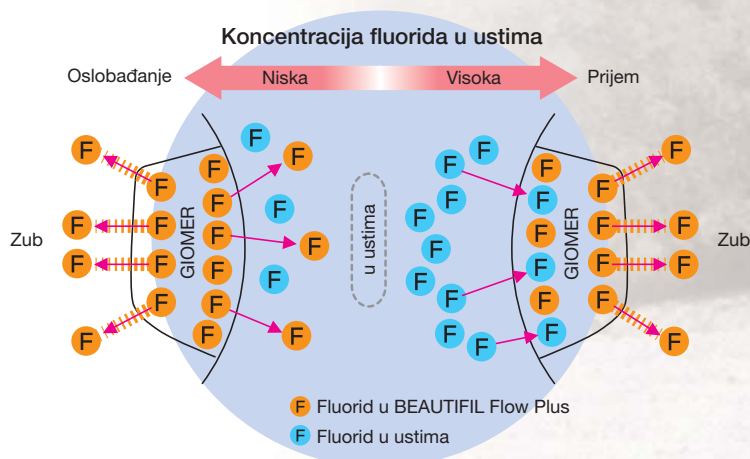

Modus oslobađanja i prijema fluorida kod BEAUTIFIL Flow Plus

... APLIKUJE SE KAO FLOW

Slučaj 1 - restauracija kaviteta klase I



Pre



Posle

Fotografije: Dr. Ken Kobayashi

Slučaj 2 - zamena zlatnog inleja



Pre



Posle

Fotografije:
Dr. Naotoke Akimoto, Tsurumi univerzitet, Japan






Prirodna estetika, izuzetno dobro poliranje





Široka paleta boja Vam omogućava da pacijentima ponudite siguran kompozit, sjajnih estetskih osobina, koji oslobađa i prima fluoride.







Osnovne boje su optimizovane za postizanje kameleon efekta i harmonično uklapanje u okolnu zubnu strukturu.

Jedinstven balans resina i filera rezultirao je materijalom koji se izuzetno dobro polira. Restauracija izgleda estetski prirodno i ima dugotrajan sjaj.






F00





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 |
|  |  |  |  |  |








| | | | |
|---|---|---|---|
| B1 | B2 | C2 | D2 |
|  |  |  |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SA0.5 | SA0.50 | A10 | A20 | Inc | BW |
|  |  |  |  |  |  |

F03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 |
|  |  |  |  |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| B1 | B2 | C2 | D2 |
|  |  |  |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA0.5 | A20 | A30 | Inc | BW | MI | CV |
|  |  |  |  |  |  |  |



„Resin Cone”-tehnika

U centralni kavitet se aplikuju inkrementi u obliku konusa, kao kada želite da izmodelujete greben ili ivice grebena. Ovi konusni inkrementi se polimerizuju u jednom koraku, a da se pri tom ne razlivaju, već ostaju postojani. Na taj način u samo jednom potezu stvarate sve važne strukture restauracije, a da ne izostavljate sloj bonda na kritičnim mestima.

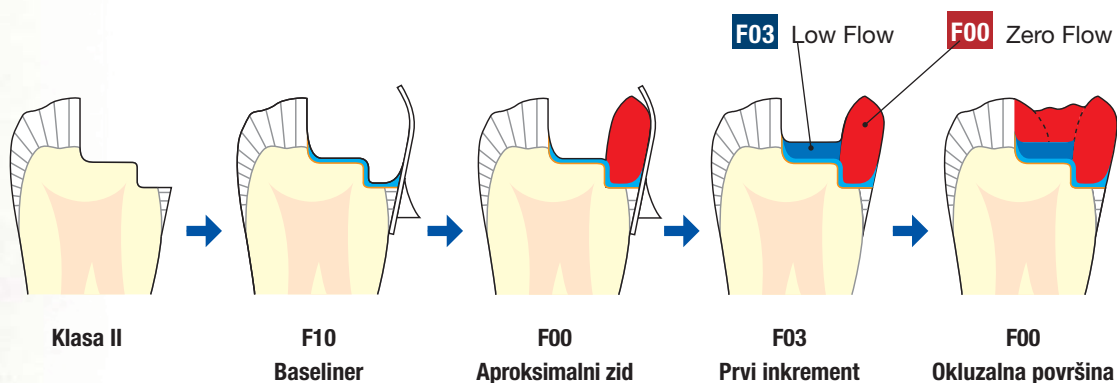


Pouzdana stabilnost i dugotrajnost

Na osnovu velike otpornosti na pritisak BEAUTIFIL Flow Plus se može upotrebiti i u klasičnim Flow-indikacijama kao i završni sloj materijala za okluzalnu površinu zuba. Usled odlično izbalansiranih fizičkih osobina, restauracije su dugotrajne i estetske.


BEAUTIFIL Flow Plus u poređenju sa drugim Hibrid-Kompozitima

OTPORNOST NA PRITISAK

Otpornost na pritisak BEAUTIFIL Flow Plus-a je slična i bolja od vodećih hibrid kompozita i idealna za restauracije klase I i II.

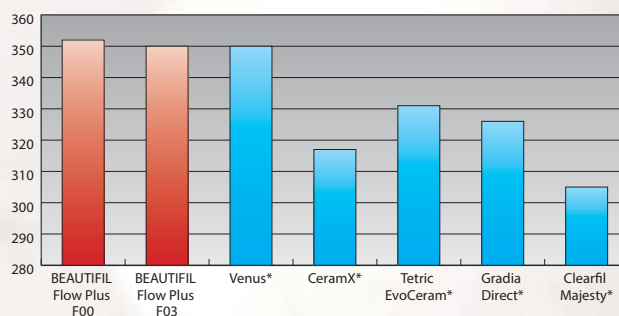

Test na abraziju/četkica za zube u težini.-%

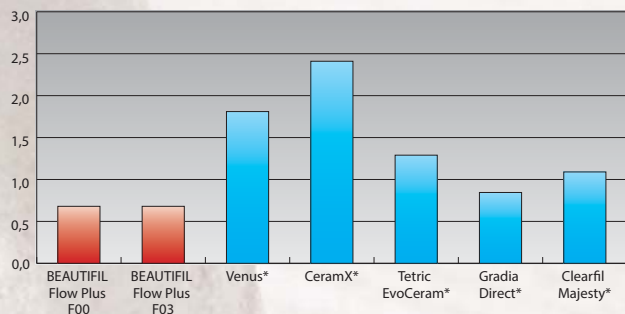


ABRAZIONA STABILNOST

U poređenju sa vodećim hibridnim kompozitima BEAUTIFIL Flow Plus pokazuje značajno bolje rezultate!

Čvrstoća savijanja

Na osnovu visoke čvrstoće savijanja i značajne otpornosti na plastične i elastične deformacije je BEAUTIFIL Flow Plus idealan za stvaranje okluzalnih površina.

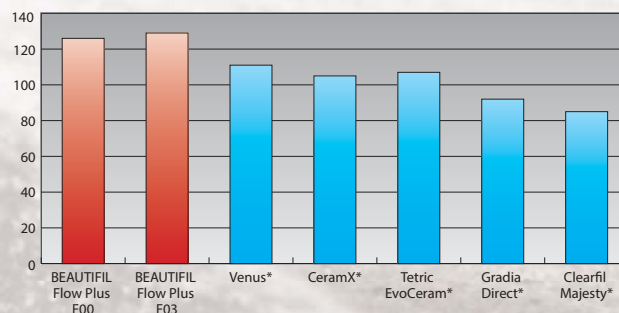

* Nisu marke SHOFU INC.
Izvor: Istraživanje i razvoj SHOFU INC.

Porudžbene informacije



BEAUTIFIL Flow Plus F00

Hybrid-Kompozit, restaurativni materijal u špricu od 2,2 gr u bojama SA0.5, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0.5O, A1O, A2O, Incisal, Bleaching White



BEAUTIFIL Flow Plus F03

Hybrid-Kompozit, restaurativni materijal u špricu od 2,2 gr u bojama SA0.5, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A2O, A3O, Incisal, Bleaching White, Milky, Cervical



BEAUTIFIL Flow F02

Flow-Kompozit, koji prima i oslobađa fluoride, špic po 2 gr u bojama A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (Gum)



BEAUTIFIL Flow F10

Flow-Kompozit, koji prima i oslobađa fluoride, špic po 2 gr u bojama A1, A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T



BEAUTIFIL II

Kompozit koji prima i oslobađa fluoride Tube od 4,5 gr I Tips sa 0,25 gr u bojama A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, Incisal, Bleaching White, A2O, A3O



BEAUTIFIL OPAQUER

Flow-Kompozit, koji prima i oslobađa fluoride, jako pokrivan, špic po 2 gr u bojama UO (Universal Opaque) und LO (Light Opaque)



Manufacturer

SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China

EC REP SHOFU DENTAL GmbH Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)



410212 · 03/2015