

# Nettoyage, Finition et Lustrage final



## OneGloss® et SuperBuff®

### **OneGloss – Un seul outil pour la finition et le polissage**

Les instruments OneGloss sont capables de finir et polir toute restauration composite en une seule fois. Ils excellent dans la suppression des excès de ciment sans risque pour les inlays fragiles, comme dans l'effacement des colorations de surface sans risque pour l'émail.

### **SuperBuff – Lustrage final pour restaurations composites**

SuperBuff est un disque en feutre, imprégné de pâte, destiné au lustrage des restaurations composites directes et indirectes. Facile à activer avec de l'eau ou la salive, le disque permet un polissage parfait sur toutes surfaces.



La recherche est notre meilleur produit

# La solution pour toute restauration composite

## OneGloss® – Deux en un

Les instruments **OneGloss** sont constitués d'oxyde d'aluminium très concentré associé à un liant silicone.

**OneGloss** est un polissoir deux en un.

En agissant simplement sur la pression de contact, on passe de la finition au polissage.

– Pression d'environ 1.0 Newton → finition

– Pression d'environ 0.3 Newton → polissage


**OneGloss** est disponible dans les formes suivantes:

- Cupule pour cuspidé, incisal et occlusal
- IC pour labial, lingual, buccal, interproximal
- Midi-point pour occlusal, labial, lingual et buccal
- Mini-point pour fissure

Forme	Cupule	Midi-point	IC	Mini-point	Mandrin
N° ISO	060	060	100	030	
Réf.	0181	0182	0183	0186	0435

Le Kit **OneGloss** contient 20 polissoirs de chaque: Cup, Midi-point et IC ainsi que 3 mandrins CA Réf. 0180

## SuperBuff® – Lustrage final pour restaurations composites

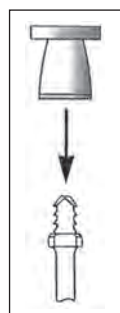

Facile à activer avec de l'eau ou la salive, le disque feutre **SuperBuff**, imprégné d'oxyde d'aluminium, produit une pâte crémeuse.

La face et le côté du disque jetable peuvent être utilisés sur de multiples surfaces, même les puits ou fissures. Les disques non-montés s'adaptent sur un mandrin Super-Snap.

- Le disque imprégné élimine les projections
- Plus rapide qu'avec une seringue de pâte
- Polit tous les composites
- Activé par l'eau ou la salive

Kit **SuperBuff**: 25 disques et 2 mandrins CA  
Recharge disques **SuperBuff**: 50 pces  
Mandrin Super-Snap CA: 6 pces

Réf. 0535  
Réf. 0536  
Réf. 0439



Kit SuperBuff®  
Réf. 0535

Kit OneGloss®  
Réf. 0180

**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17 · D-40878 Ratingen · Allemagne  
Tél.: +49 (0) 2102/8664-0 · Fax: +49 (0) 2102/8664-64  
E-Mail: info@shofu.de · www.shofu.de

