


EyeSpecial C-III

Istruzioni importanti per la sicurezza

Per le informazioni più aggiornate sulla fotocamera EyeSpecial C-III, consultare il sito www.shofu.de.

Contenuto della confezione

Alla prima apertura della confezione di EyeSpecial C-III, controllare che siano presenti tutti i componenti illustrati di seguito. Se si riscontra la mancanza di qualche elemento, contattare il proprio rivenditore SHOFU il più presto possibile.

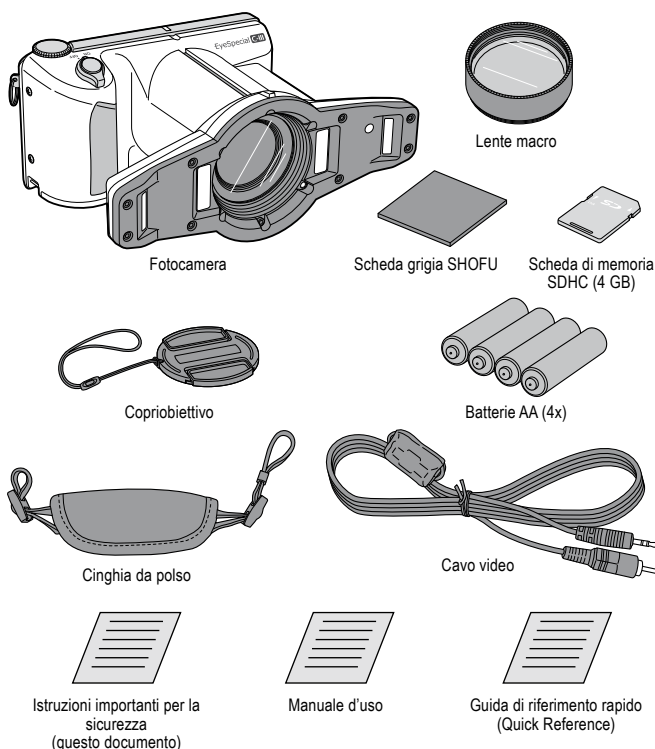

Accessori opzionali

Per utilizzare questa fotocamera sono necessari i seguenti accessori opzionali, venduti separatamente:

- Supporti di memorizzazione: scheda SD/scheda SDHC* (le schede SDXC non sono compatibili)
- Batterie AA: batterie alcaline / batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro (NiMH)

* Se il vostro computer non è provvisto di slot SD/SDHC, acquistare un lettore di schede SD/SDHC esterno per poter trasferire i dati dalla scheda di memoria al computer.

Indicazioni di sicurezza

Per usare il prodotto in sicurezza, leggere attentamente quanto segue.

Descrizione degli avvisi di avvertenza e attenzione

Le indicazioni di sicurezza sono rappresentate utilizzando i seguenti due simboli e sono importanti per prevenire incidenti con potenziali lesioni gravi o mortali. Per utilizzare il dispositivo in sicurezza, è necessario comprendere il significato di questi simboli.

Avvertenza	Il simbolo "Avvertenza" indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare decesso o lesioni gravi.
Attenzione	Il simbolo "Attenzione" indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare lesioni minori o danni alle cose.

Ulteriori note e simboli

Ulteriori note e simboli utilizzati nel manuale d'uso sono illustrati di seguito:

Nota Indica un potenziale malfunzionamento che potrebbe verificarsi se quanto descritto viene ignorato.

Info Spiegazione supplementare per facilitare l'utilizzo.

Uso dell'apparecchio

Avvertenza

- **Se la fotocamera si surriscalda, emette odore di bruciato, produce fumo o presenta un funzionamento anomalo di qualsiasi tipo, sospendere immediatamente l'uso e rimuovere le batterie. Anche le batterie potrebbero essere surriscaldate: fare attenzione a non scottarsi quando si rimuovono.**

Se si ignorano queste avvertenze e si continua l'uso, potrebbero verificarsi scosse elettriche, ustioni e combustione spontanea. Contattare immediatamente il proprio rivenditore SHOFU per la riparazione.

- **Se i componenti interni della fotocamera vengono esposti a causa di una caduta o di danni subiti, sospendere immediatamente l'uso della fotocamera e rimuovere le batterie, facendo attenzione a non toccare le parti esposte.**

Il flash è ad alta tensione e potrebbe provocare scosse elettriche. Se si ignorano queste avvertenze e si continua l'uso, possono verificarsi scosse elettriche, ustioni o principio d'incendio. Contattare il proprio rivenditore SHOFU per l'assistenza tecnica.

- **Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

Prestare la massima cautela quando si usa questa fotocamera vicino a bambini, per evitare incidenti o lesioni.

- **Non smontare mai, né tentare di riparare o aggiustare la fotocamera.**
Alcune parti di questa fotocamera sono ad alta tensione. Se si toccano i componenti interni, si potrebbero causare scosse elettriche. Qualsiasi manipolazione non corretta potrebbe anche causare malfunzionamento della fotocamera e provocare lesioni, scosse elettriche o principio d'incendio. Se sono necessarie riparazioni, contattare il proprio rivenditore SHOFU.
- **Usare solo le batterie indicate. Evitare di usare batterie danneggiate o deformate.**
L'uso di qualsiasi batteria difettosa può causare perdita di liquido, principio d'incendio o esplosione.
- **Non far scattare il flash nelle immediate vicinanze degli occhi. Se si utilizza il flash vicino agli occhi, usare una protezione per gli occhi.**
L'esposizione alla luce intensa prodotta dal flash può causare danni alla vista.
- **Se un corpo estraneo (metallo, liquido, polvere) penetra all'interno della fotocamera, sospendere immediatamente l'uso e rimuovere le batterie.**
Se si continua ad usare la fotocamera, potrebbero verificarsi scosse elettriche o principio d'incendio. Rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per avere ulteriore assistenza.
- **Non usare questa fotocamera in spazi ristretti, quali ad esempio borse, scatole o cassette.**
L'insufficiente dispersione del calore potrebbe causare surriscaldamento o principio d'incendio.
- **Non usare questa fotocamera in luoghi dove può bagnarsi facilmente, ad esempio vicino ad un lavello, lavandino o serbatoio d'acqua. Non mettere sopra la fotocamera nessun oggetto contenente liquidi.**
Possono verificarsi scosse elettriche o principio d'incendio.
- **Non usare questa fotocamera in luoghi in cui sono presenti gas altamente combustibili o benzina, benzene, diluenti.**
Si potrebbero causare esplosioni o principio d'incendio.

Attenzione

- **Se si usa questa fotocamera per un lungo periodo di tempo, evitare di tenerla a contatto con la cute.**
Il corpo della fotocamera diventa molto caldo e potrebbe causare scottature.
- **Non rimuovere le batterie e la scheda SD subito dopo un lungo periodo di uso continuato.**
Le batterie e la scheda SD possono diventare molto calde durante l'uso. Toccando le batterie e la scheda, si potrebbero causare ustioni cutanee. Spegnerne la fotocamera e attendere che si raffreddi.
- **Non coprire il flash con le dita o altri oggetti mentre viene usato.**
Il flash genera calore e potrebbe causare ustioni.
- **Non premere eccessivamente sul display a cristalli liquidi, né esercitare una forza eccessiva senza motivo.**
In questo modo lo schermo potrebbe rompersi e provocare lesioni. Se il liquido viene a contatto con la cute, sciacquare immediatamente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua abbondante e consultare il medico.
- **Maneggiare la fotocamera e gli accessori con delicatezza.**
In caso contrario si potrebbero provocare danni o lesioni.

- **Usare sempre la cinghia da polso per evitare danni o lesioni causati dalla caduta della fotocamera.**
- **La cinghia da polso deve essere controllata periodicamente per verificare che non sia allentata o logorata.**
- **Se si ignorano eventuali anomalie e si continua ad usare la fotocamera, possono verificarsi danni o lesioni.**

Manutenzione e conservazione

Avvertenza

- **Gli accessori piccoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini, per evitare che vengano inghiottiti accidentalmente.**
Se un bambino inghiotte qualsiasi parte di questo prodotto, consultare immediatamente un medico.
- **Non usare soluzioni infiammabili quali ad esempio il benzene o diluenti per pulire questa fotocamera.**
Si potrebbero causare esplosioni o principio d'incendio.

Attenzione

- **Evitare di usare o conservare questa fotocamera (incluse le batterie) sotto la luce diretta del sole, in condizioni di temperatura e umidità elevate o vicino a fuoco o fonti di calore. Evitare anche di usarla e conservarla in luoghi in cui si generano gas corrosivi o vicino ad apparecchi che producono forte magnetismo o onde elettromagnetiche.**
Ciò potrebbe causare difetti, deformazione della fotocamera, perdita del liquido delle batterie, produzione di calore, esplosione, principio d'incendio e danni o lesioni.



Manufacturer

SHOFU INC., 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD., 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

SHOFU DENTAL CORPORATION, 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK, Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD., No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China

SHOFU DENTAL GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)