


Metodi di azionamento

La maggior parte delle operazioni può essere eseguita toccando direttamente lo schermo. È possibile azionare le funzioni anche con i guanti o con la punta di una matita.

Consigli



Il sistema percettivo del touch screen usato per la EyeSpecial C-III è diverso da quello degli smartphone. Toccare delicatamente lo schermo con le unghie o la punta delle dita.

È possibile azionare questa fotocamera anche con i tasti funzione (piccoli pulsanti argentati) sul corpo della macchina intorno al touch screen. Per maggiori dettagli, vedere pagina 10 del manuale d'uso.

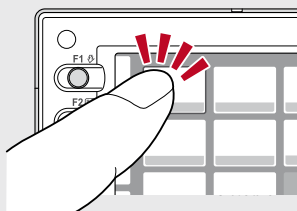

Accendere la fotocamera

Per accendere la fotocamera ruotare l'interruttore di accensione su "ON".

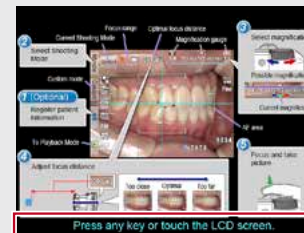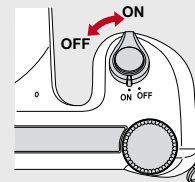

Quando compare la schermata iniziale, premere qualsiasi tasto o toccare lo schermo LCD. Si può iniziare a fotografare.

La prima volta che si accende la fotocamera potrebbe essere necessario impostare lingua, data, ora e unità di misura. Per maggiori dettagli, vedere pagina 16/17 del manuale d'uso.

Fotografare

Per fotografare, seguire le procedure da 1 a 5

1 Inserire le informazioni del paziente (optional)

Per maggiori dettagli, vedere pagina 20 del manuale d'uso.

2 Selezionare la modalità di scatto

Premere **[Mode]**, per visualizzare tutte le modalità preinstallate. Selezionare la modalità ottimale per ogni scopo.




Premere qui per alternare la visualizzazione delle modalità dettagli e panoramica.

Per maggiori dettagli su ciascuna modalità, vedere sul retro di questa guida di riferimento rapido.


3 Selezionare il rapporto di ingrandimento

Regolare il rapporto di ingrandimento ruotando il selettore (non è possibile modificare il rapporto di ingrandimento toccando lo schermo).

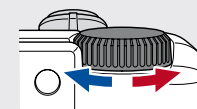

4 Impostare la distanza di messa a fuoco

Basandosi sulla distanza di messa a fuoco ottimale visualizzata in alto sullo schermo, regolare la distanza tra fotocamera e soggetto da fotografare. Cambiare la posizione della fotocamera fino a quando il soggetto appare nitido sullo schermo.

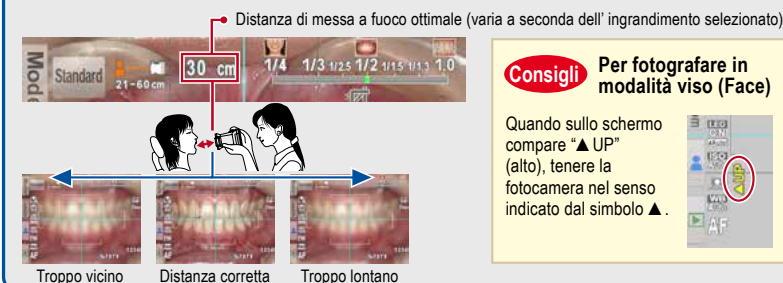


Consigli Per fotografare in modalità viso (Face)

Quando sullo schermo compare "▲ UP" (alto), tenere la fotocamera nel senso indicato dal simbolo ▲.




5 Messa a fuoco e scatto

Premere il pulsante di scatto fino a metà per mettere a fuoco. Se la messa a fuoco è corretta, appare in basso a destra sullo schermo un indicatore di messa a fuoco verde. Premere quindi il pulsante di scatto fino in fondo per eseguire la foto.

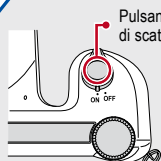

Consigli Autofocus Spot

È possibile mettere a fuoco al di fuori dell'area di autofocus toccando direttamente sullo schermo l'area che si desidera mettere a fuoco (modalità Spot AF). Per ritornare alla modalità AF standard, premere per alcuni secondi sull'area che era stata messa a fuoco in modalità spot.

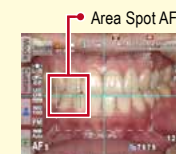


Per ulteriori informazioni sulla formattazione delle schede di memoria SD consultare il manuale d'uso a pag. 36.

Se mentre si sta scattando si preme inavvertitamente qualsiasi tasto e compare un altro menu, premere il pulsante di scatto fino a metà per ritornare alla modalità di scatto.


È possibile inserire il numero del paziente (ID) sulle immagini o salvare le proprie impostazioni personalizzate nella fotocamera. Per maggiori dettagli, vedere pag. 20 del manuale d'uso.

Visualizzare le immagini

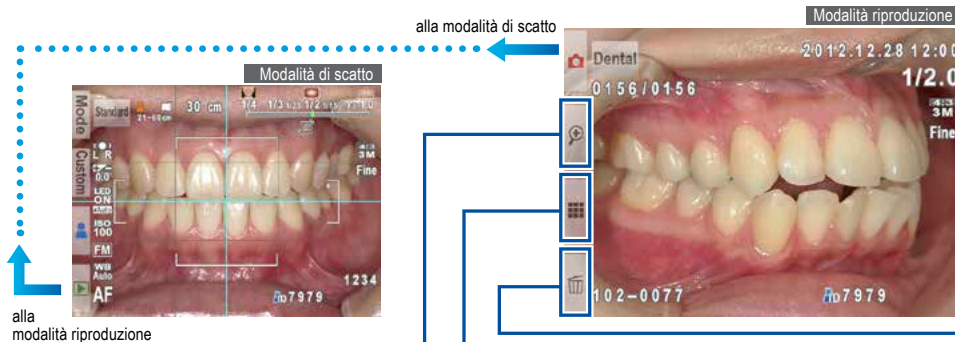

In modalità di scatto, toccare il tasto per passare alla modalità riproduzione. Viene visualizzata l'ultima immagine ripresa.

Ruotare il selettore per scorrere le immagini indietro e in avanti.

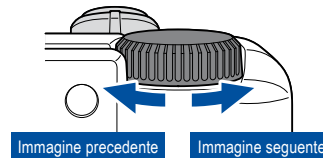

Ingrandimento



Anteprime

Per visualizzare una singola immagine, selezionarla toccando lo schermo.




Cancellazione

Se si desidera cancellare l'immagine, premere "OK" per procedere. O premere "Cancel" per annullare la cancellazione.



Funzioni di elaborazione


Premere il tasto MENU mentre è visualizzata un'immagine che si desidera elaborare.

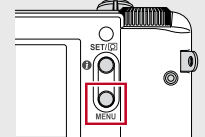

1. Disegno sulle immagini
Disegnare linee sulle immagini toccando lo schermo.



2. Rotazione delle immagini
Le immagini possono essere ruotate di 90°.

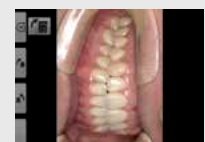

3. Protezione delle immagini
Proteggere le immagini per evitare la cancellazione accidentale o modifiche indesiderate.


Per maggiori dettagli, vedere pagina 34/35 del manuale d'uso.

Inserire batterie e scheda di memoria SD

Installare le batterie


Batterie compatibili: 4x AA

(Batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro o batterie alcaline)

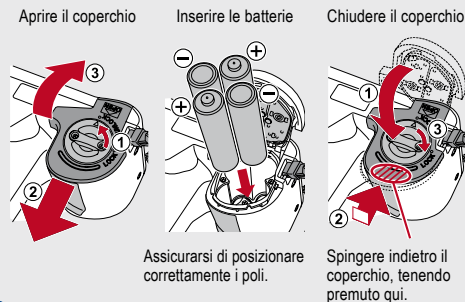

Inserire la scheda di memoria SD

Schede di memoria SD compatibili:

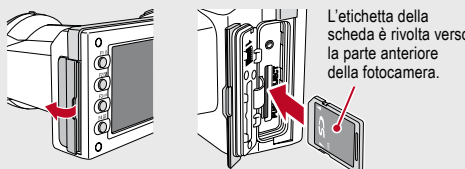

I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi commerciali di SD-3C, LLC.

Modalità di scatto



EyeSpecial C-III Quick reference

Manufacturer
SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
[EC REP] SHOFU DENTAL GmbH Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)