

FL-Bond II

самопротравливающая адгезивная система, выделяющая фтор

FL-Bond II является самопротравливающей двухэтапной адгезивной системой, выделяющей фтор. Она обеспечивает высококачественное соединение с эмалью и дентином и гарантирует надежное краевое прилегание. Система отличается хорошими рабочими характеристиками и повышенной биосовместимостью. Благодаря умеренно вязкой консистенции FL-Bond II удобно наносится и хорошо держится на наклонных стенках полости. Таким образом, толщина адгезивной пленки на всей отпрепарированной поверхности получается одинаковой, а соединение – прочным.

Показания

- Адгезивное соединение любого композита с зубными тканями
- Предварительная подготовка зубных тканей перед нанесением композитных цемента
- Починка реставраций

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Просто и быстро – процедура в 2 этапа
- Оптимальная вязкость и адгезия
- Рентгеноконтрастность – для точной диагностики
- Накопление и выделение фтора
- Высокая прочность соединения

Нанесение


■ **ЭТАП 1 – ОБРАБОТКА ПРАЙМЕРОМ**
FL-Bond II Primer содержит новый эффективный мономер, который способствует адгезии, и новый фотоинициатор. Самопротравливающий протравка обрабатывает поверхность эмали и дентина, поэтому отдельная протравка фосфорной кислотой не требуется.

■ **ЭТАП 2 – ОБРАБОТКА АДГЕЗИВОМ**
В состав FL-Bond II Bonding Agent добавлены содержащие фтор S-PRG-наполнители, которые постоянно защищают от вторичного кариеса – путём оптимизированной реминерализации прилегающих твердых тканей зуба. Благодаря высокому содержанию наполнителя, FL-Bond II гарантирует превосходную защиту от истирания, фактически не допускает краевого вымывания материала, обеспечивая их надежную герметизацию.




Номер	Кол-во	Изделие
1306	1 шт.	FL-Bond II Kit (набор) Primer 5 мл, Bonding Agent (адгезив) 5 мл, MicroBrush розовая и желтая, по 25 шт., 1 палетка для замешивания, 1 пластмассовая крышка
1307	5 мл	FL-Bond II Primer
1308	5 мл	FL-Bond II Bonding Agent (адгезив)
1309	6 мл	FL-Bond II Etchant (протравка)

Низкая вязкость
(другой адгезив)

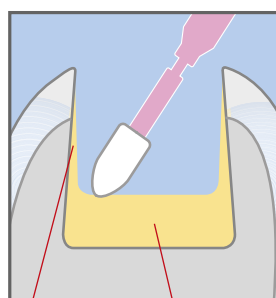

Очень тонкий слой адгезива
Жидкость скопилась на дне полости

Умеренная вязкость
(FL-Bond II)

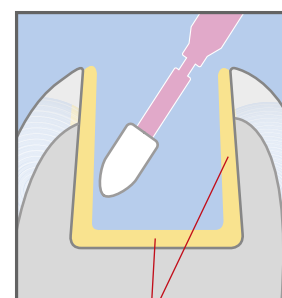

Одинаковая толщина адгезивного слоя

Для справки

Адгезивное протравливающее средство FL-Bond II Etchant разработано специально для протравки перед нанесением самопротравливающих адгезивных систем на эмаль; оно содержит приблизительно 7% фосфорной кислоты.