

# OneGloss M

## MOUNTED

One-Step per la rifinitura  
e lucidatura del composito



# Rifinire e lucidare con un

I gommini lucidanti monopassaggio in silicone e ossido di alluminio garantiscono una rifinitura ottimale di tutti i tipi di restauri in composito: modificando semplicemente la pressione di utilizzo si passa dalla rifinitura alla lucidatura.

- I gommini OneGloss M sono montati su un gambo CA in acciaio inossidabile e sono sterilizzabili
- Rifinitura con una pressione di utilizzo elevata (ca. 1,0 N)
- Lucidatura con una pressione di utilizzo leggera (ca. 0,3 N)
- Rimozione di residui di composito o di cemento e lucidatura dello smalto dentale esercitando una pressione da moderata a leggerissima
- Lucidatura dello smalto dopo la rimozione degli attacchi ortodontici e del tartaro o eliminazione di discromie con una leggerissima pressione d'utilizzo
- Numero di giri consigliato da 3.000 min<sup>-1</sup> a 10.000 min<sup>-1</sup> spruzzando acqua a intermittenza; non superare la velocità massima consentita di 15.000 min<sup>-1</sup>



# solo strumento

## Scelta della forma

L'assortimento comprende quattro forme appositamente studiate per le superfici dentali da lavorare.


### Coppa

per cuspidi, area incisale, occlusale



### Midipoint

per l'area labiale, linguale, vestibolare, occlusale

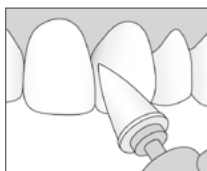


### Minipoint

per solchi, area cervicale



### IC

per l'area labiale, linguale, vestibolare, interprossimale

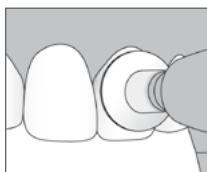

# Informazioni per gli ordini

## OneGloss M

con gambo CA, 12 pz. per confezione



**Forma: Minipoint**

PN 0186



**Forma: Coppa**

PN 0187



**Forma: Midipoint**

PN 0188



**Form: IC**

PN 0189



**SHOFU DENTAL GmbH**

Am Brüll 17 · 40878 Ratingen / Germania

Tel.: +49 (0) 2102 / 8664 - 0 · Fax: +49 (0) 2102 / 8664 - 64

info@shofu.it · www.shofu.it