

# EyeSpecial C-IV

## SHOFU Cross Polarizer

Lesen Sie die beigefügten „Wichtigen Sicherheitshinweise“ für die EyeSpecial C-IV, bevor Sie diesen Kreuzpolarisationsfilter verwenden.

Dieses Produkt ist exklusiv nur für die EyeSpecial C-IV oder neuere Modelle geeignet. Es ist nicht mit den Vorgängermodellen EyeSpecial C-II und C-III kompatibel.

### Verwendungszweck

Deutliche Hervorhebung der Oberflächenstruktur oder der inneren Struktur natürlicher Zähne, wie z.B. Mamelonstruktur oder Risse, die bei einer „normalen“ Aufnahme kaum zu erfassen sind.

### Vorbereitung

Aktivieren Sie den Modus für die Kreuzpolarisation, bevor Sie den Filter erstmalig einsetzen (die Aktivierung ist nur einmalig erforderlich).

#### 1. Aktivieren des Kreuzpolarisations-Modus

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um den Kreuzpolarisations-Modus zu aktivieren. Wenn die Nachricht „Optionale Funktion ändern?“ erscheint, drücken Sie „OK“.



QR-Code zur Aktivierung des Modus für die Kreuzpolarisation

#### 2. Als benutzerdefinierten Modus speichern

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um den Modus für die Kreuzpolarisation als benutzerdefinierten Modus zu speichern. Wenn die Nachricht "Register wählen" erscheint, wählen Sie eine der drei benutzerdefinierten Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera dabei im Aufnahmemodus (einer der 9 voreingestellten Modi) befindet, da im benutzerdefinierten Modus kein QR-Code gescannt werden kann.



QR-Code zur Speicherung als benutzerdefinierter Modus

### Fotografieren

#### 1. Auswahl des benutzerdefinierten Modus

Stellen Sie vor der Aufnahme sicher, dass das Symbol für den entsprechenden benutzerdefinierten Modus links oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.




#### 2. Montieren der Makro-Linse

Montieren Sie die Makro-Linse auf das Kameraobjektiv und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sicher befestigt ist.

#### 3. Aufsetzen des Kreuzpolarisationsfilters

Setzen Sie den SHOFU Cross Polarizer wie gezeigt vorsichtig auf die Makro-Linse, bis er hörbar einrastet.

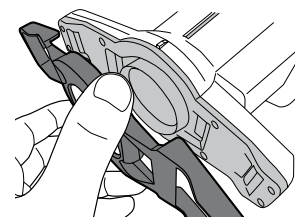


#### 4. Fotografieren

Die Vorgehensweise bei der Aufnahme von Bildern ist die gleiche wie im Telemakro-Modus. Bitte beachten Sie dazu das Benutzerhandbuch der Kamera.

#### 5. Abnehmen des Kreuzpolarisationsfilters

Um den Polarisationsfilter wieder abzunehmen, heben Sie vorsichtig die Rastnasen auf beiden Seiten der Kamera an und drücken Sie den Filter nach außen.

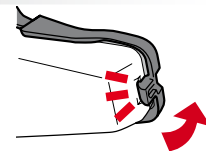

### Scannen eines QR-Codes



1 Drücken Sie im Aufnahmemodus **Custom** oder die F2-Taste



2 Wählen Sie „QR-Code scannen“



3 Drücken Sie den Auslöser, um den Scanvorgang zu starten



Manufacturer  
**SHOFU INC.**

11 Kamitakamatsu-cho,  
Fukuine, Higashiyama-ku,  
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany [www.shofu.com](http://www.shofu.com)