

# EyeSpecial C-IV

## SHOFU Cross Polarizer

RU

- Прочтите прилагаемые „Важные указания по безопасности“ для EyeSpecial C-IV, прежде чем использовать этот перекрестный поляризационный фильтр.
- Данный продукт предназначен исключительно только для EyeSpecial C-IV или же более поздних моделей. Он несовместим с предыдущими моделями EyeSpecial C-II и C-III.

### Назначение

Четкое выделение структуры поверхности или внутренней структуры естественных зубов, например, структуры мамелонов или трещин, которые едва ли возможно зафиксировать при „обычной“ съемке.

### Подготовка

Активируйте режим перекрестной поляризации, прежде чем Вы будете устанавливать фильтр в первый раз (активация требуется только один раз).

#### 1. Активация режима перекрестной поляризации

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы активировать режим перекрестной поляризации. Если появится сообщение „Change the optional setting?“ (Изменить дополнительную настройку?), нажмите „ОК“.



QR-код для активации режима перекрестной поляризации

#### 2. Сохранение в качестве пользовательского режима

Сканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы сохранить режим перекрестной поляризации в качестве пользовательского. Когда появится сообщение „Select the number“ (выбрать регистр), выберите одну из трех пользовательских настроек. Убедитесь, что камера при этом находится в режиме съемки (один из 9 предустановленных режимов), так как в пользовательском режиме невозможно сканировать QR-код.



QR-код для сохранения в качестве пользовательского режима

### Фотографирование

#### 1. Выбор пользовательского режима

Перед съемкой убедитесь, что символ соответствующего пользовательского режима отображается в левом верхнем углу экрана.




#### 2. Установка макрообъектива

Установите макрообъектив на объектив камеры и поворачивайте его по часовой стрелке, пока он не будет надежно закреплен.

#### 3. Установка перекрестного поляризационного фильтра

Осторожно установите SHOFU Cross Polarizer на макрообъектив, как показано на рисунке, пока не услышите щелчок.

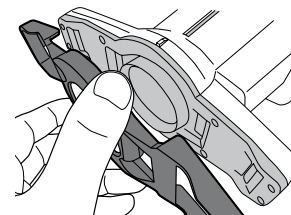


#### 4. Фотографирование

Процедура съемки изображений такая же, что и в режиме Теле-макро. Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством для пользователя по работе с камерой.

#### 5. Удаление перекрестного поляризационного фильтра

Чтобы снова снять поляризационный фильтр, осторожно поднимите защелки по обеим сторонам камеры и выдвиньте фильтр наружу.

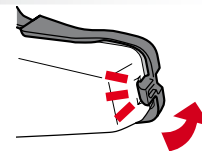

### Сканирование QR-кода



1 В режиме записи нажмите [Custom] или клавишу F2



2 Выберите „Scan QR code“ (сканировать QR-код)



3 Нажмите кнопку пуска, чтобы начать сканирование



Manufacturer  
**SHOFU INC.**

11 Kamitakamatsu-cho,  
Fukuine, Higashiyama-ku,  
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com