

EyeSpecial C-IV


Важные указания по безопасности

RU

 Актуальную информацию о EyeSpecial C-IV Вы найдете на сайте www.shofu.de.

Содержимое пакета

Проверьте, пожалуйста, при первом вскрытии упаковки с EyeSpecial C-IV наличие следующих позиций. Как можно скорее проинформируйте Вашего дилера SHOFU, если что-либо отсутствует.

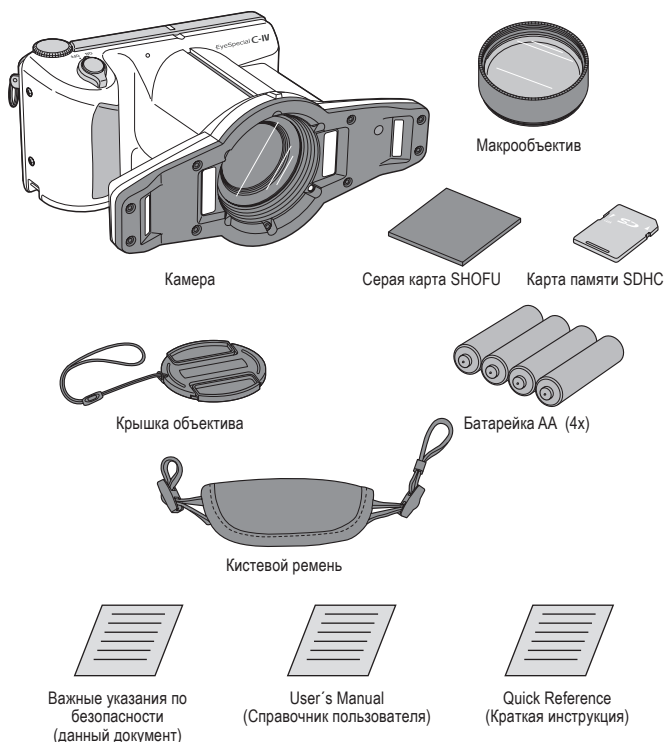

Дополнительные аксессуары

Для работы камеры требуются следующие дополнительные позиции, приобретаемые отдельно:



- Батарейки AA (щелочные батарейки / перезаряжаемые никель-металлогидридные (NiMH) батарейки)
- Носитель: карта SD/SDHC/SDXC
Если на Вашем компьютере нет слота SD/SDHC/SDXC, используйте внешнее устройство чтения / записи SD/SDHC/SDXC для передачи данных с карты памяти на Ваш компьютер.
- Кабель HDMI (HDMI, тип A ↔ Micro-HDMI, тип D)
Рекомендация (если внешнее устройство имеет разъем HDMI тип A): SAC-HD14EU15BK фирмы ELECOM

Указания по технике безопасности

Прочтите, пожалуйста, внимательно следующие инструкции для безопасного использования устройства.

Описание символов „Предупреждение“ и „Внимание“

Эти указания по безопасности отображаются с использованием следующих двух символов. Это сделано для предотвращения несчастных случаев, которые могут привести к травмам или смерти. Важно понимать значение данных символов для безопасного использования устройства.

 Предупреждение	Символ „Предупреждение“ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать или не устранить, может привести к смерти или серьезным травмам.
 Внимание	Символ „Внимание“ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать или не устранить, может привести к травмам легкой или средней тяжести или к материальному ущербу.

Прочие указания и символы

Прочие указания и символы, используемые в справочнике пользователя, поясняются далее:



(Указание): Указывает на потенциальную неисправность, которая может возникнуть при несоблюдении описания.



(Информация):
Дополнительное объяснение для облегчения работы с камерой.

При применении

Предупреждение

- Если камера перегревается, пахнет горелым, дымится или во время работы имеет какие-либо иные отклонения, немедленно прекратите использование устройства и извлеките батарейки из устройства. Возможно, батарейки также перегрелись. Будьте осторожны при извлечении батареек.
Несоблюдение данных предупреждений и дальнейшее использование могут привести к поражению электрическим током, ожогам или самовозгоранию. Немедленно свяжитесь с Вашим дилером SHOFU, чтобы отремонтировать камеру.
- Если внутренние компоненты камеры оголены, например, если камера упала или повреждена, следует немедленно прекратить использование и извлечь батарейки из устройства. Будьте при этом осторожны, чтобы не коснуться оголенных деталей.
Вспышка работает при высоком напряжении и может привести к поражению электрическим током. Несоблюдение данных предупреждений и дальнейшее использование могут привести к поражению электрическим током, ожогам и пожару. Свяжитесь, пожалуйста, с Вашим дилером SHOFU, чтобы получить инструкции по обслуживанию и уходу.
- Держать камеру подальше от детей.
При использовании камеры рядом с детьми следует действовать предельно осторожно во избежание несчастных случаев или травм.

- Ни в коем случае Вы не должны разбирать камеру или пытаться отремонтировать ее собственными силами.
Камера содержит несколько высоковольтных деталей. Прикосновение к внутренним компонентам может привести к поражению электрическим током. Любая неправильная манипуляция может к тому же привести к неисправности камеры, что, в свою очередь, может привести к травмам, поражению электрическим током или пожару. Свяжитесь, пожалуйста, с Вашим дилером SHOFU, если потребуется ремонт или наладка.
- Не включайте вспышку в непосредственной близости от человеческого глаза. Используйте защиту для глаз, если включаете вспышку рядом с глазами.
Интенсивный свет вспышки может повредить человеческий глаз.
- Если внутрь камеры попало инородное тело (металл, жидкость или порошок/пыль), немедленно прекратите использование камеры и извлеките батарейки из устройства.
Длительное использование камеры может привести к пожару или поражению электрическим током. Свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство, чтобы получить дополнительную помощь.
- Не используйте камеру в очень ограниченных пространствах, таких как сумка, коробка или выдвижной ящик.
Это может привести к перегреву или даже пожару, т.к. есть лишь недостаточная теплоотдача.
- Не используйте камеру в местах, где она может легко намочнуть, как например, рядом с раковиной, умывальником, емкостями с водой или в иных местах, где Вы используете воду. Не ставьте емкости с водой на камеру.
Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не используйте камеру в местах, где содержится легковоспламеняющийся газ или там, где хранится бензин, бензол или растворитель.
Это может привести к взрывам и пожару.

Внимание

- Избегайте контактов с кожей, если пользуетесь данной камерой продолжительное время.
Корпус камеры нагревается и может вызвать ожог.
- Если Вы пользовались камерой продолжительное время, то не следует сразу же извлекать батарейки и карту SD.
Батарейки и SD-карта могут во время использования нагреваться. Прикосновение к горячим батарейкам и SD-картам может привести к ожогам. Выключите камеру и подождите, пока она остынет.
- Не включайте вспышку, если она закрыта Вашими пальцами или каким-то другим объектом.
Вспышка излучает тепло и может вызвать ожоги.
- Не нажимайте слишком сильно на жидкокристаллический дисплей и не применяйте силу.
Это может привести к поломке экрана и травмам. Если жидкость, имеющаяся внутри, попадет на кожу, промойте кожу большим количеством воды. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Обращайтесь осторожно с камерой и аксессуарами.
Грубое и неосторожное обращение может привести к травмам.
- Всегда пользуйтесь кистевым ремнем, чтобы избежать травм в результате случайного падения камеры.
- Кистевой ремень следует регулярно проверять на наличие ослабления или износа ремня.
- Игнорирование отклонений и дальнейшее использование камеры могут иметь следствием травмы или повреждения.

Техническое обслуживание и хранение

Предупреждение

- Мелкие аксессуары следует держать в недоступном для детей месте, чтобы исключить случайное проглатывание.
- Не используйте для очистки данной камеры легковоспламеняющиеся растворы, такие как бензол или растворители.
Это может привести к взрывам или пожарам.

Внимание

- Избегайте использования и хранения данной камеры (включая батарейки) под прямыми солнечными лучами, при высоких температурах и высокой влажности воздуха или вблизи огня. Применение или хранение в местах, где образуются опасный газ или вблизи устройств, генерирующих сильный магнетизм или электромагнитные волны, также следует исключить.
Использование или хранение в таких местах может привести к повреждению, деформации камеры, утечке жидкости из батарейки, перегреву, взрывам, пожару или травмам.

Батарейки

Предупреждение

Взрывоопасность

- В случае замены с использованием батарейки неправильного типа это может привести к взрывам, поражению электрическим током или пожару. Используйте только вышеупомянутые батарейки.
Не используйте поврежденные или деформированные батарейки.
- Утилизация батареек на открытом огне или в горячей печи, а также механическое измельчение или разрезание корпуса батарейки может привести к взрывам, поражению электрическим током или пожару. Ни в коем случае не бросайте батарейки в огонь или горячую печь.
Не пытайтесь измельчить батарейки механическим путем или разрезать.

Опасность взрыва или утечки жидкости батареек

- Использование, хранение или транспортировка батареек при чрезвычайно высоких или низких температурах может привести к взрывам, утечке жидкости батареек, поражению электрическим током или пожару. Ни в коем случае не следует использовать, хранить или транспортировать батарейки при экстремально высоких или низких температурах.
- Использование, хранение или транспортировка батареек на больших высотах с низким давлением воздуха может привести к взрывам, утечке легковоспламеняющихся жидкостей или газа, поражению электрическим током или пожару. Ни в коем случае не следует использовать, хранить или транспортировать батарейки на больших высотах с низким давлением воздуха.
- Хранение батареек в среде с чрезвычайно высокими температурами может привести к взрывам, утечке легковоспламеняющихся жидкостей или газа, поражению электрическим током или пожару. Не оставляйте батарейки в местах с чрезвычайно высокими температурами.
- Хранение батареек в среде с чрезвычайно низким давлением воздуха может привести к взрывам, утечке легковоспламеняющихся жидкостей или газа, поражению электрическим током или пожару. Не оставляйте батарейки в местах с чрезвычайно низким давлением воздуха.



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

www.shofu.com