


# Super-Snap®

## Užbaigimas ir poliravimas savo paviršiuje metalo neturinčiais lanksčiais diskais

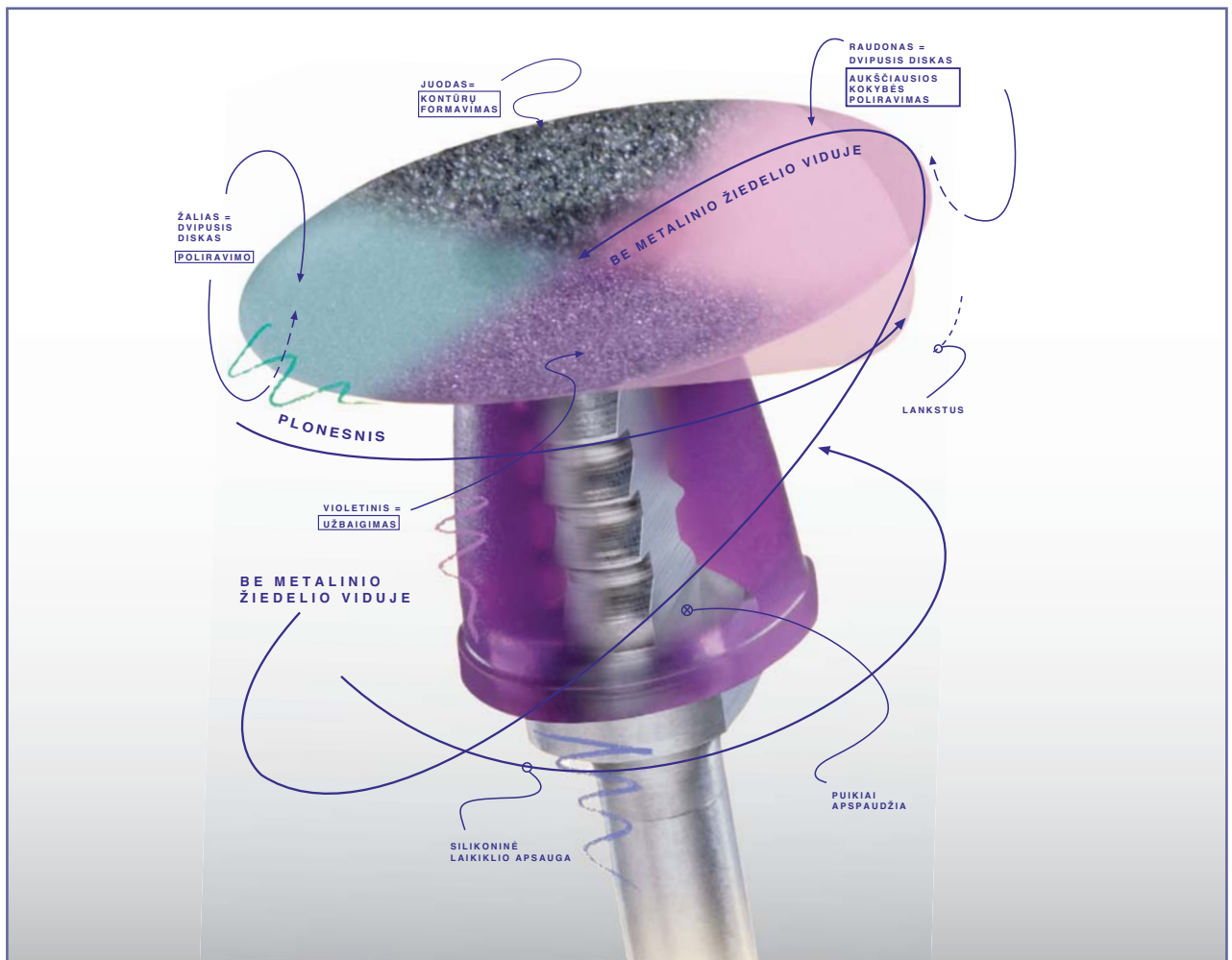

**Super-Snap** diskai yra skirti lengvam, greitam ir saugiam visų mikrofilinių ir hibridinių kompozitų paviršių formavimui, užbaigimui ir poliravimui. Elastinis kotelis diską leidžia patogiai uždėti ant diskų laikiklio.

Kadangi diskas yra be metalinio žiedelio viduryje, nepažeidžiama kompozito paviršiaus forma ir spalva. Itin ploni diskai yra labai lankstūs, paspaudus sulinksta, tačiau nelūžta ir leidžia lengviau pasiekti interproksimalines vietas.

Diskai yra keturių skirtingų grublėtumų, o visą diskų asortimentą rasite „Super-Snap Rainbow Technique“ rinkinyje.




Proven Products for Better Dentistry

# Žingsnis po žingsnio link aukščiausios kokybės restauracijos rezultato

- **Suderinimas pagal spalvas**  
Aiškus, logiškas ir ergonomiškas instrumentų išdėstymas.
- **Ploni dvipusiai diskai**  
Saugiam ir greitam poliravimui, nekeičiant disko ar neapsukant jo pusės.
- **Saugus laikiklio dizainas**  
Tvirtai laiko diskus ir užtikrina visišką kontrolę poliravimo metu.
- **Poliravimo instrumento paviršiuje nėra metalinių detalių**  
Nepažeidžiama paviršiaus forma ir spalva.
- **Plonos poliravimo juostelės**  
Patogiam priėjimui prie proksimalinių paviršių. Jos pagal spalvas yra suderintos su „Super-Snap“ diskais: juoda / violetinė (šiurkšti ir vidutinė), žalia / raudona (plona ir itin plona).

Paviršiaus šiurkštumas (Ra) / mikronas

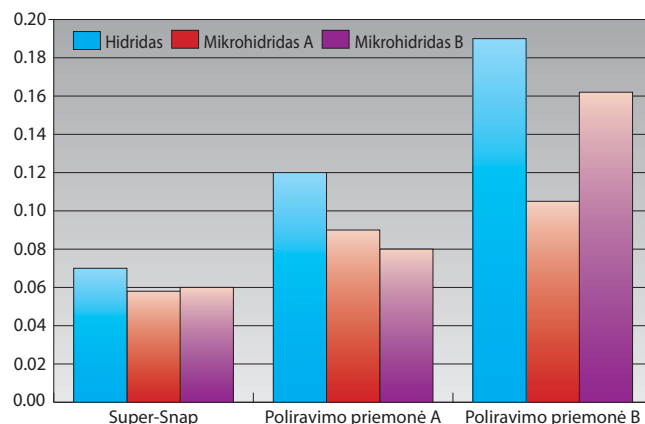

Lyginant su kitais poliravimo diskais, **Super-Snap** sistema garantuoja puikius rezultatus, ypač sunkiai poliruojamiems kompozitams.

## Suderinimas pagal spalvas

	Formavimas		Užbaigimas/šlifavimas				Poliravimas		Ypatingas/iki blizgesio poliravimas																										
<b>Super-Snap</b> Diskai																																			
	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521																									
	(50 vnt. dėžutėje)		Juodas (šiurkštus)		Violetinis (vidutinis)			Žalias (smulkus)		Raudonas (labai smulkus)																									
<b>Super-Snap</b> Laikiklis																																			
	FG - 0438										CA - 0439										CA - 0404 Plastikinis														
	(6 vnt. dėžutėje)										(6 vnt. dėžutėje)										(100 vnt. dėžutėje)														
<b>Super-Snap</b> Šlifavimo juostelės																																			
	L525												L526																						
	(50 vnt. dėžutėje)												Juoda / violetinė (šiurkšti / vidutinė)												Žalia / raudona (smulki / labai smulki)										

## Super-Snap Rainbow Technique Kit



PN0500

**Super-Snap** Rainbow Technique Kit yra 180 diskų, 40 šlifavimo juostelių, 4 plieniniai laikikliai, CA kotas.



www.shofu.de

**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17 • 40878 Ratingen Vokietija

Tel.: +49 (0) 21 02 / 86 64-0

Faksas: +49 (0) 21 02 / 86 64-64

El paštas: info@shofu.de