

BEAUTIFIL II

Dauerhaft Fluorid abgebendes ästhetisches Restaurationsmaterial

Beautifil II überzeugt durch sein ästhetisches Erscheinungsbild mit einer ausgezeichneten Farbtonabstimmung, exzellenten Verarbeitungseigenschaften und dem Anti-Plaque-Effekt. Aufgrund des bioaktiven S-PRG-Füllanteils besitzt das Komposit der Giomer-Kategorie zudem die Fähigkeit, Fluoride entsprechend der Fluorkonzentration im Mund abzugeben oder aufzunehmen.



Die Füllertechnologie integriert die Lichtleitungs- und Lichtstreuungseigenschaften natürlicher Zähne und ermöglicht so unsichtbare Restaurationen mit nur einer Farbschicht.

Die Oberflächenhärte der in Beautifil II enthaltenen Füllstoffe ist schmelzähnlich und antagonistenfremdlich. Das Material eignet sich daher gleichermaßen für die Versorgung von Front- und Seitenzähnen.

VORTEILE

- Natürliche Lichtleitung
- Farbstabilität
- Anti-Plaque-Effekt
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Außergewöhnliche Radiopazität
- Nachhaltige Fluoridfreigabe und -aufnahme
- Verlässliche Festigkeit und Langlebigkeit



BEAUTIFIL II (Fortsetzung von Seite 59)

Dauerhaft Fluorid abgebendes ästhetisches Restaurationsmaterial


Anwendungsbereiche

Direkte Restaurationen, die eine optimale Ästhetik und Biokompatibilität erfordern, wie z. B.:

- Restauration von Kavitäten der Klassen I bis V
- Restauration von Zahnhalserosionen und Wurzelkaries
- Reparatur von frakturierten Schneidekanten
- Verblendschalen und Stumpfaufbauten
- Direkte kosmetische Zahnkorrekturen



BEAUTIFIL II - Sets und Einzelkomponenten

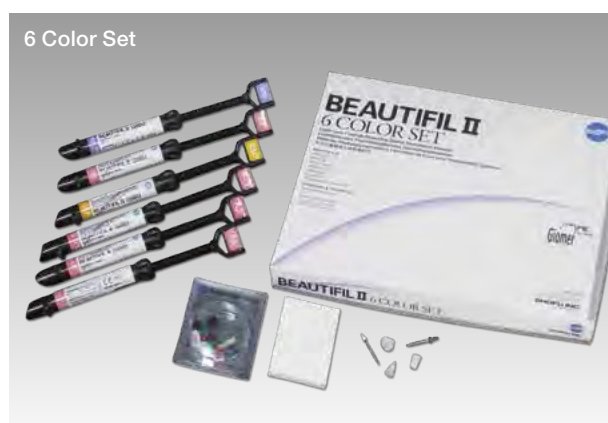

6 Color Set

- 6 Beautifil II Spritzen à 4,5 g (A2, A3, A3,5, B2, A30, Inc)
- 1 Dura-White (FL2) • Super-Snap Single Kit • OneGloss Trial Set
- Papierblock

Tips - 6 Color Set

- 120 Beautifil II Tips à 0,25 g (je 20x A2, A3, A3,5, A30, B2, Inc)
- 1 Dura-White (FL2) • Super-Snap Single Kit • OneGloss Trial Set
- Papierblock

Cosmetic Kit

- 3 Beautifil II Spritzen (A2, A3, Inc) à 4,5 g
- 1 Spritze Beautifil Flow F02 (A2), 2 g • 1 Spritze Beautifil Opaquer (L0), 2 g
- 1 Dura-White (FL2) • Super-Snap Single Kit • OneGloss Trial Set
- 10 St. Spritzenaufsatz • Papierblock

Farbe	Best.-Nr. 4,5 g
SPRITZE	
A1	1401
A2	1402
A3	1403
A3,5	1404
A4	1405
B1	1408
B2	1409
B3	1410
C2	1412
C3	1413
Inc (Incisal)	1415
BW (Bleaching White)	1416
A20 (opakes A2)	1419
A30 (opakes A3)	1420

Farbe	Best.-Nr. 0,25 g
TIPS, 20 St.	
A1	1752
A2	1753
A3	1754
A3,5	1755
A4	1756
B1	1759
B2	1760
C2	1763
Inc (Incisal)	1766
BW (Bleaching White)	1767
A20 (opakes A2)	1770
A30 (opakes A3)	1771

Best.-Nr.	Menge	Produkt
1775	1 St.	Beautifil II - 6 Color Set
1776	1 St.	Beautifil II Tips - 6 Color Set
1777	1 St.	Beautifil II - Cosmetic Kit
1401-1420	4,5 g	Beautifil II - Spritze
1752-1771	0,25 g	Beautifil II - Tips, 20 St.
1424	1 St.	Beautifil II Farbring
1306	1 St.	FL-Bond II Kit (s. S. 70)
0180	1 St.	OneGloss Kit (s. S. 25/26)
0223	12 St.	Dura-White FL2 (s. S. 13)
0500	1 St.	Super-Snap Rainbow Techn. Kit (s. S. 30)