


CompoMaster Coarse ■ CompoMaster

Per composito

I gommini lucidanti al silicone sono impregnati con una miscela ben bilanciata di particelle di diamante puro. Hanno una lunga durata, sono indicati per la rifinitura e lucidatura veloce di restauri in composito e permettono di ottenere una superficie estremamente omogenea e liscia.

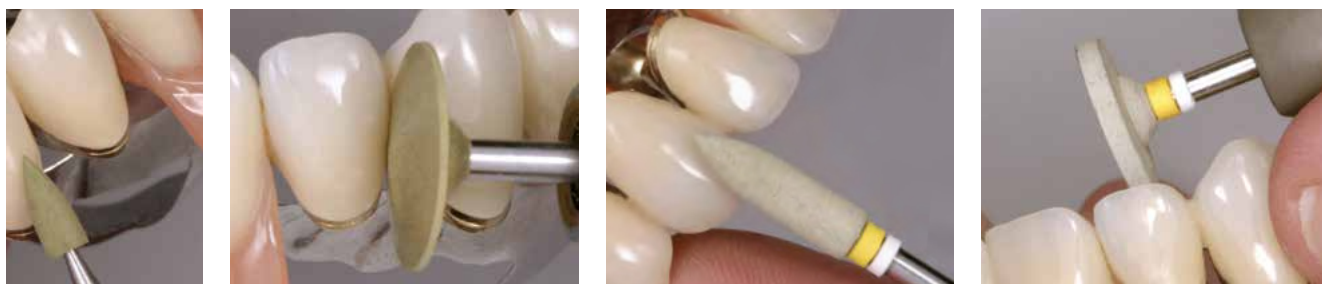

La diversa granulometria di CompoMaster Coarse a grana grossa in combinazione con i gommini a grana più fine CompoMaster (contrassegnati da un anello giallo e uno bianco) assicura un protocollo efficiente per un trattamento superficiale omogeneo.

Indicazioni

- I gommini CompoMaster Coarse sono stati appositamente studiati per sgrossare le superfici in composito e prelevigarle in un unico passaggio di lavoro.
- Le superfici così preparate vengono poi lucidate con gli strumenti CompoMaster.



VANTAGGI

- Gommini al silicone con particelle di diamante integrate
- Movimento di rotazione preciso
- Ottimale rapporto tra pressione di utilizzo e numero di giri
- Rettificabili
- Non è necessario l'uso di pasta lucidante
- Durata particolarmente lunga
- Lavorazione con limitate vibrazioni
- Limitato sviluppo di calore



Sono disponibili quattro assortimenti (due con gambo HP e due con gambo CA) contenenti quattro diversi gommini lucidanti.



	Forma	Ogiva	Lenticolare	Coppa	Minipoint	KN7	WH6	Disco non montato
	ISO-N.	040	090	065	030	125	120	220
CompoMaster Coarse	HP	116C			119C	117C	118C	131C
	CA	111C	112C	113C	114C			
CompoMaster	HP	0116			0119	0117	0118	
	CA	0111	0112	0113	0114			

PN	Quantità	Prodotto
ARTICOLI SINGOLI		
111C-114C, 116C-119C	3 pz.	CompoMaster Coarse, gambo HP e CA
131C	1 pz.	CompoMaster Coarse, disco non montato + mandrino HP
0111-0114, 0116-0119	3 pz.	CompoMaster, gambo HP e CA
KIT		
120C	1 conf.	CompoMaster Coarse, gambo HP, 1x ogiva, minipoint, KN7, WH6
115C	1 conf.	CompoMaster Coarse, gambo CA, 1x ogiva, lenticolare, coppa, minipoint
0120	1 conf.	CompoMaster, gambo HP, 1x ogiva, minipoint, KN7, WH6
0115	1 conf.	CompoMaster, gambo CA, 1x ogiva, lenticolare, coppa, minipoint

**Gommini lucidanti:**

Min⁻¹ Cons. 5.000-15.000 / Max. 20.000 / PU 0,5 N

**Disco non montato:**

Min⁻¹ Cons. 5.000-10.000 / Max. 15.000 / PU 0,5 N

info

Per l'uso intraorale, utilizzare i gommini in ambiente asciutto, con intermittenza e con apporto di aria compressa in modo da proteggere la polpa dentale ed evitare un surriscaldamento del composito.