


DirectDia Paste

Diamantierte Polierpaste für die intra- und extraorale Hochglanzpolitur

Die DirectDia Paste ist zu 20 % mit Diamantpartikeln einer Korngröße von 2-4 µm gefüllt. In kurzer Zeit wird ein perfekter Hochglanz auf natürlichem Zahnschmelz und allen Restauraionswerkstoffen (Keramik, Verblend- und Füllungskomposite, Metalle usw.) erzielt. Die Paste hat einen angenehmen Limonengeschmack und ist wegen ihrer grünen Einfärbung sehr gut im Mund des Patienten zu erkennen.



Reiskorngröße Menge für einen Zahn

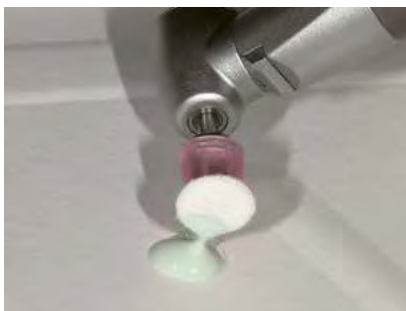

Verwendung der Super-Snap Buff Disk



Durch grüne Einfärbung leicht zu erkennen

Anwendungsbereiche

- Beseitigung von Verfärbungen und zur Hochglanzpolitur aller Restauraionswerkstoffe
- Entfernung von Zahnbelägen und zur Endpolitur natürlicher Zähne

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0558	1 Spritze	DirectDia Paste, 3 g 2 Dosierungsspitzen mit Kappe

info

Zur Anwendung werden Super-Snap Buff Disks und Buff Mini-Disks als Trägerinstrumente empfohlen. Die flexiblen Filzscheiben erlauben eine effektive Anwendung und erreichen sämtliche Bereiche des natürlichen Zahns.

Zur Vermeidung von Spritzern oder übermäßiger Wärmeerzeugung sollten rotierende Instrumente mit einer Geschwindigkeit von weniger als 10.000 Min⁻¹ verwendet werden.

Eine trockene Oberfläche ist nicht notwendig. Im Anschluss einfach mit Wasser abspülen.

VORTEILE

Grüne Einfärbung zur leichten Erkennung im Mund

Exakte Dosierung durch den Applikationstip

Abgestimmte Viskosität für ein einfaches Handling

Angenehmer Limonengeschmack

