



Gingi Curettage Diamanten

Für Kronen- / Brückenpräparationen und das Einschleifen von Zahnstümpfen

Die standardgekörnnten goldfarbenen Diamanten eignen sich für das Anlegen von Hohlkehlen bei Kronen- und Brückenpräparationen. Sie schaffen optimale Voraussetzungen für eine genaue Abdrucknahme. Die Diamanten haben eine Abschrägung um 3° und eine um 45° zur Achse geschrägte Spitze; der Radius der Spitze beträgt 1,52 mm.

Best.-Nr.	C061-1	C062-1	C063-1	C081-1	C082-1	C083-1	C084-1	C085-1	C101-1	C102-1	C103-1
ISO-Nr.	012	014	017	013	016	018	019	021	014	015	021
Kopflänge (mm)	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0



Min⁻¹ Empf. 160.000 - 450.000 / AD 0 - 0,8 N

Best.-Nr.	Menge	Produkt
C061-1- C103-1	6 St.	Gingi Curettage Diamanten, Schaft FG
C200	1 St.	Gingi Curettage Diamonds Kit

Anwendungsbereiche

■ IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Für Kronen- und Brückenpräparationen sowie das Einschleifen von Zahnstümpfen

Einsatzbereich

Geeignet für folgende Materialien:
Zahnhartsubstanz



VORTEILE

Exakte, gleichmäßige Verteilung der Diamantpartikel

Präzisionsrundlauf


Vibrationsarmes Schleifen

Hohe Schleifleistung bei geringer Anpresskraft und sicherer Kühlung

info

An der Farbkennzeichnung der Bestellnummer lässt sich die jeweils maximal zulässige Umdrehungszahl erkennen:

Cyan	max. 450.000 Min ⁻¹
Blau	max. 300.000 Min ⁻¹
Orange	max. 160.000 Min ⁻¹

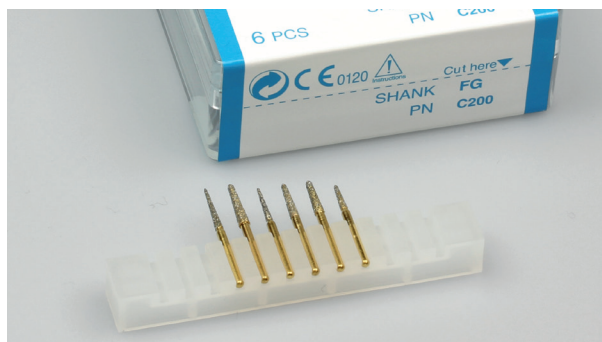

Das Gingi Curettage Diamonds Kit enthält die sechs gängigsten Formen C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1 und C103-1.