

# Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme

Für die Politur von mikrogefüllten und Hybrid-Kompositen

Das Super-Snap- und Super-Snap X-Treme Poliersystem besteht aus beschichteten Scheiben und Polierstreifen, die zur Politur von mikrogefüllten und Hybrid-Kompositen eingesetzt werden.



## Anwendungsbereiche

IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Konturieren, Finieren und Polieren bis zum Hochglanz von Komposit-Restaurationen

- Konturieren: Super-Snap Scheibe schwarz (grobe Körnung)
- Finieren: Super-Snap Scheibe violett (mittlere Körnung)
- Polieren: Super-Snap Scheibe grün (feine Körnung)
- Hochglanz: Super-Snap Scheibe rot (extrafeine Körnung)

Zum Finieren und Polieren im Interproximalbereich Super-Snap Polierstreifen verwenden.

### Kein Metallzentrum

Vermeidung von Beschädigungen und Verfärbungen des Komposits und der Zahnhartsubstanz



### Dünne, flexible Scheiben

Biegen sich ohne zu brechen und ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Approximalbereichen

### Silikon-Schaftschutz

Elastischer Träger ermöglicht ein einfaches Aufsetzen auf das Mandrell

## VORTEILE

Extrem dünn und hochflexibel

Kein Metallzentrum

Durchgängiges System: von der Konturierung zum Hochglanz in vier Schritten

Abgestimmte Polierstreifen für die Interdentalbereiche

Kein Zerkratzen von Zahnhartsubstanz oder Restauration

Stabiler Halt der Scheibe auf Mandrell (maximale Kontrolle während der Politur)



Min<sup>-1</sup> Empf. 10.000 - 12.000 / Max. 15.000 / Anpressdruck 0,3 - 0,6 N

## ■ Super-Snap Scheiben

Die Super-Snap Scheiben sind mit elastischen Trägern versehen, die auf das Mandrell aufgesetzt werden. Da sie kein metallisches Zentrum haben, werden versehentliche Beschädigungen und Verfärbungen von Komposit und Zahnhartsubstanz verhindert. Die dünnen Scheiben sind flexibel, biegen sich ohne zu brechen und ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Approximalbereichen. Sie sind stirnseitig, schaftseitig und beidseitig

beschichtet und in den Größen Standard (ø 12 mm) und Mini (ø 8 mm) lieferbar.

## ■ Super-Snap Polierstreifen

Zum Super-Snap Poliersystem gehören die abgestimmten Polierstreifen, die in Körnung und Beschichtung den Scheiben entsprechen. Mit ihnen lässt sich auch interdental eine optimale Oberflächenbearbeitung und Politur erzielen.

	Konturieren		Finieren				Polieren		Hochglanz	
Scheiben										
	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
	Schwarz (grob)		Violett (mittel)				Grün (fein)		Rot (extrafein)	
Mandrells										
	0438			0439			0440			
	FG			W			W (Kunststoff)			
Polierstreifen										
	L525						L526			
	Schwarz (grob) / Violett (mittel)						Grün (fein) / Rot (extrafein)			

Best.-Nr.	Menge	Produkt
<b>Super-Snap</b>		
0500	1 St.	Super-Snap Rainbow Technique Kit, Schaft W (s. S. 30)
0505	1 St.	Super-Snap Mini-Kit, Schaft W
L506	50 St.	Super-Snap Scheiben, schwarz (grob), stirnbeschichtet
L507	50 St.	Super-Snap Minischeiben, schwarz (grob), stirnbeschichtet
L508	50 St.	Super-Snap Scheiben, violett (mittel), stirnbeschichtet
L509	50 St.	Super-Snap Scheiben, violett (mittel), schaftseitig beschichtet
L528	50 St.	Super-Snap Scheiben, violett (mittel), beidseitig beschichtet
L522	50 St.	Super-Snap Minischeiben, violett (mittel), beidseitig beschichtet
L501	50 St.	Super-Snap Scheiben, grün (fein), beidseitig beschichtet
L519	50 St.	Super-Snap Minischeiben, grün (fein), beidseitig beschichtet
L502	50 St.	Super-Snap Scheiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet
L521	50 St.	Super-Snap Minischeiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet
L525	100 St.	Super-Snap Polierstreifen, schwarz / violett (grob / mittel)
L526	100 St.	Super-Snap Polierstreifen, grün / rot (fein / extrafein)

Best.-Nr.	Menge	Produkt
<b>Super-Snap X-Treme</b>		
0508	1 St.	Super-Snap X-Treme Technique Kit, Schaft W (s. S. 30)
0506	1 St.	Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit, je 50 Super-Snap X-Treme Scheiben grün und rot
0507	1 St.	Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit, je 50 Super-Snap X-Treme Scheiben grün und rot
L511	50 St.	Super-Snap X-Treme Scheiben, grün (fein), beidseitig beschichtet
L512	50 St.	Super-Snap X-Treme Scheiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet
L531	50 St.	Super-Snap X-Treme Minischeiben, grün (fein), beidseitig beschichtet
L532	50 St.	Super-Snap X-Treme Minischeiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet
<b>Mandrells</b>		
0438	6 St.	FG-Mandrell *
0439	6 St.	W-Mandrell, Stahl
0440	100 St.	W-Mandrell, Kunststoff

\* FG-Schaft nur wählen, wenn langsam laufende Antriebe mit FG-Halterung zur Verfügung stehen.

Die Super-Snap und Super-Snap X-Treme Scheiben und Polierstreifen sind Einwegartikel.




# Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme (Fortsetzung von Seite 29)

Für die Politur von mikrogefüllten und Hybrid-Kompositen

## ■ Super-Snap X-Treme Scheiben

Die Super-Snap X-Treme Polierscheiben – eine Weiterentwicklung der grünen und roten Super-Snap Scheiben – sind dicker und erlauben einen höheren Anpressdruck während der Politur. Sie zeichnen sich durch längere Standzeiten und eine erhöhte Festigkeit aus, ihre bekannte Flexibilität im interproximalen Bereich bleibt jedoch erhalten.

Die roten Super-Snap X-Treme Scheiben weisen erstmals eine innovative 3-D-Beschichtung auf. Zwischen den homogen verteilten Halbkugeln aus Aluminiumoxid-Partikeln kann sich der Politurabrieb ablagern und wird nach außen transportiert. Ein Zusetzen oder Verklumpen der Scheibenoberfläche und Sekundärkratzer durch Polierstaub werden so sicher verhindert.

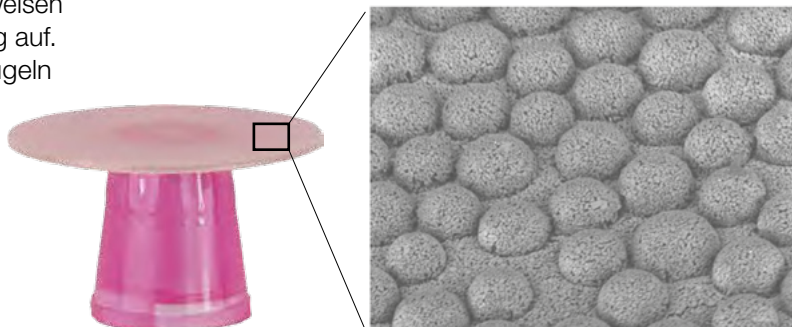

L D3,1 x400 200 µm

Die Super-Snap X-Treme Scheiben (Mini- und Standard-Durchmesser) sind beidseitig beschichtet.



Das Super-Snap Rainbow Technique Kit enthält die aufeinander abgestimmten Scheiben in vier verschiedenen Körnungen. Enthalten sind 180 Scheiben (100 St. Standard / 80 St. Mini), 40 Polierstreifen, 2 Dura-White Steine (CN1 und FL2), 1 CompoSite Fine Midispitze und 4 Winkelstück-Mandrells.



Im Lieferumfang des Super-Snap X-Treme Technique Kit sind insgesamt 160 Scheiben in vier verschiedenen Körnungen enthalten (80 St. Super-Snap / 80 St. Super-Snap X-Treme), 40 Polierstreifen, 2 Dura-White Steine (CN1 und FL2), je 2 CompoSite und CompoSite Fine Midispitze sowie 4 Winkelstück-Mandrells.



Das Super-Snap Mini-Kit enthält Scheiben in allen verfügbaren Körnungen: 48 Scheiben (32 St. Standard / 16 St. Mini), 1 CompoSite Fine Midispitze und 1 Winkelstück-Mandrell.



Das Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit enthält je 50 Standard-Scheiben in Grün und Rot. Im Super-Snap X-Treme Mini-Disk Kit sind je 50 Mini-Polierscheiben (grün und rot).