




TPE Diamanten

Gewebeschützende, stirnseitig belegte Diamanten für die subgingivale Schulterpräparation

Ein bezeichnendes Merkmal dieser Präparationsdiamanten ist die unbeschichtete Abschrägung zur Schneidfläche, die ein Verletzen des angrenzenden Gewebes oder ein Unterschneiden der Axialwand während der Schulterpräparation verhindert. TPE Diamanten (Tissue-Protective, End-Cutting) gibt es mit normaler Kopfgröße in den Körnungen fein und grob und mit kurzem Kopf in grober Körnung.

Best.-Nr.	680C-1	680F-1	682C-1	682F-1	682S-1	684C-1	684F-1	684S-1	686C-1	686F-1
ISO-Nr.	010	010	012	012	012	014	014	014	016	016
Kopflänge (mm)	9,0	9,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0
Durchmesser (mm)	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6

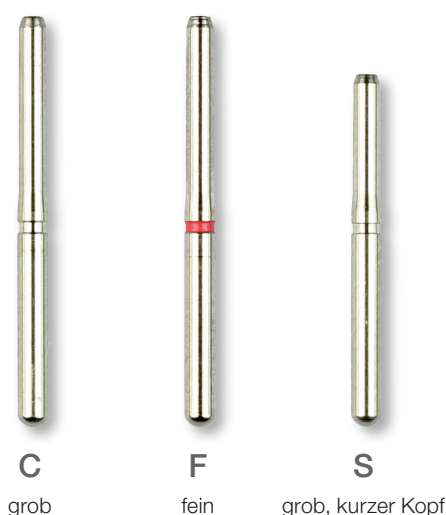

VORTEILE

- Gewebeschonend durch stirnseitige Diamantbeschichtung
- Exakt zentriert
- Lange Standzeit
- Konstante Schleifleistung

Anwendungsbereiche

IN DER ZAHNARZTPRAXIS

- Grob (C - ohne Schaftmarkierung): schnelles Reduzieren des Schulterrandes am gingivalen Sulcus
 - Fein (F - rote Schaftmarkierung): Feinbearbeitung der Schulter, Finieren der subgingivalen Stufenpräparation
- Der kurze Kopf (nur Grobkörnung) wird für Präparationen an schwer zugänglichen Stellen empfohlen.

Einsatzbereich

Zahnhartsubstanz: Schulterpräparation, Stufenpräparation



Das TPE Diamonds Kit enthält neun ausgewählte Diamanten.

Min⁻¹ Empf. 300.000 - 450.000 / AD 0 - 0,8 N

Best.-Nr.	Menge	Produkt
680C-1-686F-1	6 St.	TPE Diamanten, Schaft FG
0688	1 St.	TPE Diamonds Kit