

Veracia

Komposit-Konfektionszähne für die Total- und Teilprothetik

Die körperhafte Gestaltung und das anatomische Kauflächendesign machen die Veracia Front- und Seitenzähne multifunktionell uneingeschränkt für alle allgemein gültigen Aufstellkonzepte der Total- und Teilprothetik einsetzbar.

Die Konfektionszähne sind nicht mit konventionellen Acrylzähnen vergleichbar. Basierend auf der Komposit-Technologie des bewährten Solidex Verblendsystems bestehen die Zähne aus mikrogefülltem Hybrid-Komposit. Durch die Bindung der organischen und anorganischen Füllstoffe in der Komposit-Matrix wird eine für Konfektionszähne außergewöhnliche Abrasionsbeständigkeit erreicht.



Anwendungsbereiche

- Totalprothetik
- Implantatkonstruktionen
- Teleskop- und Konuskonstruktionen
- Geschiebearbeiten
- Modellgussprothesen

VORTEILE

Lebendige Oberflächenstruktur, die der Morphologie natürlicher Zähne entspricht

Multifunktionell einsetzbar für alle allgemein gültigen Aufstellkonzepte

Limitierte Formenvielfalt für eine vereinfachte Auswahl der Front- und Seitenzähne sowie eine ökonomische Lagerhaltung

Exzellente Farbabstimmung zu den VITA* Classical Farben

Aufstellarten

- Zahn-zu-Zahn-Okklusion
- Zahn-zu-zwei-Zahn-Okklusion
- Balancierte und lingualisierte Okklusion
- Front-Eckzahn geführte Okklusion
- Sequenzielle Führung

Veracia - Zubehör

Best.-Nr.	Menge	Produkt
4061	1 St.	Dental Measure II

Veracia - Cabinet

Inhalt

576 Frontzähne und 384 Seitenzähne in allen gängigen Zahnformen in den VITA* Classical Farben A2, A3, A3,5, B2 und B3

Best.-Nr.	Menge	Produkt
AOC001	1 St.	Veracia Cabinet

Hinweis: Auf Anfrage werden individuelle Veracia Cabinets zusammengestellt.





Veracia - Lebende Formenkarte

Inhalt

15 OK- und 8 UK-Frontzahnformen (138 Frontzähne) und 3 OK- / UK-Größen für den Seitenzahnbereich (48 Seitenzähne) in der Farbe A3

Best.-Nr.	Menge	Produkt
AOLM01	1 St.	Veracia Lebende Formenkarte



Veracia - 28 Teeth Set

Inhalt

3 verschiedene Frontzahnform-Varianten, kombiniert mit der Seitenzahngröße „M“ in der VITA* Classical Farbe A3

Best.-Nr.	Anterior OK / UK	Posterior OK / UK
A3STA	A3ST5 / A3A5	A3MO / A3M1
A3LSL	A3LS5 / A3LA5	A3MO / A3M1
A3LTL	A3LT5 / A3LA5	A3MO / A3M1

Veracia - Garnituren

Alle Garnituren sind in den VITA* Classical Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und in der SHOFU Whitening-Farbe W1 erhältlich. Gerne senden wir Ihnen unsere Formenkarte und das Bestellformular zu.

je 6 St./Pckg.



Veracia - Obere Frontzähne


Erhältlich in den Formen O4, O5, O6, LO5, LO6, S4, S5, S6, LS5, LS6, ST4, ST5, ST6, LT5, LT6



Veracia - Untere Frontzähne

Erhältlich in den Formen NA4, NA5, NA6, A4, A5, A6, LA5, LA6

je 8 St./Pckg.

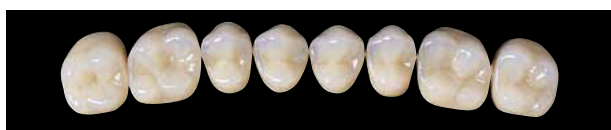

Veracia - Seitenzähne

Erhältlich in den Formen S Obere, S Untere, M Obere, M Untere, L Obere, L Untere

