

Veracia

Denti protesici in composito per protesi totale e parziale

Grazie alla forma particolare e al design anatomico delle superfici occlusali i denti anteriori e posteriori Veracia hanno un utilizzo multifunzionale illimitato per tutti i comuni concetti di montaggio di protesi totale e parziale.

I denti protesici non sono paragonabili ai tradizionali denti acrilici. Basandosi sulla tecnologia dei compositi dell'affermato sistema di rivestimento Solidex, i denti sono realizzati con un composito ibrido microriempito. Combinando nella matrice del composito riempitivi organici ed inorganici, si ottiene una resistenza all'abrasione straordinaria superiore ai tradizionali denti acrilici.



Indicazioni

- Protesi totale
- Ricostruzioni su impianti
- Restauri con corone telescopiche e coniche
- Lavori con attacchi
- Scheletrati

VANTAGGI

Tessitura superficiale naturale, simile alla morfologia dei denti naturali

Utilizzo multifunzionale per tutti i comuni concetti di montaggio

Limitata gamma di forme per una scelta semplificata dei denti anteriori e posteriori e per una gestione razionale

Eccellente corrispondenza cromatica con i colori VITA* Classical

Tipi di montaggio

- Occlusione dente a dente
- Occlusione un dente a due denti
- Occlusione bilanciata e lingualizzata
- Occlusione con guida incisale-canina
- Guida sequenziale

Veracia - Accessori

PN	Quantità	Prodotto
4061	1 pz.	Dental Measure II

Veracia - Cabinet (assortimento)

Contenuto

576 denti anteriori e 384 denti posteriori in tutte le comuni forme nei colori VITA* Classical A2, A3, A3,5, B2 e B3

PN	Quantità	Prodotto
AOC001	1 pz.	Veracia Cabinet (assortimento)





Veracia - Campionario forme

Contenuto

15 forme di denti anteriori per l'arcata superiore e 8 forme di denti anteriori per l'arcata inferiore (138 denti anteriori) e 3 misure per denti posteriori INF./SUP. (48 denti posteriori) nel colore A3

PN	Quantità	Prodotto
AOLM01	1 pz.	Veracia Campionario forme



Veracia - 28 Teeth Set

Contenuto

3 diverse varianti di forme per denti anteriori, combinate con la misura dei denti posteriori "M" nel colore VITA* Classical A3

PN	Anteriore SUP./INF.	Posteriore SUP./INF.
A3STA	A3ST5 / A3A5	A3M0 / A3M1
A3LSL	A3LS5 / A3LA5	A3M0 / A3M1
A3LTL	A3LT5 / A3LA5	A3M0 / A3M1

Veracia - File

Tutte le file sono disponibili nei colori VITA* Classical A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 e nel colore SHOFU Whitening W1. Su richiesta è disponibile il nostro campionario forme e il modulo per gli ordini.

6 pz./fila




Veracia - Denti anteriori superiori

Disponibili nelle forme O4, O5, O6, LO5, LO6, S4, S5, S6, LS5, LS6, ST4, ST5, ST6, LT5, LT6



Veracia - Denti anteriori inferiori

Disponibili nelle forme NA4, NA5, NA6, A4, A5, A6, LA5, LA6

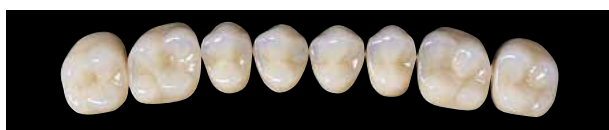

8 pz./fila

Veracia - Denti posteriori

Disponibili nelle forme S sup., S inf., M sup., M inf., L sup., L inf.

