

Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme

полировка композитов с микро- и гибридным наполнителем

В наборы Super-Snap и Super-Snap X-Treme входят диски со специальным покрытием и полировочные полоски, предназначенные для полировки композитов с микро- и гибридным наполнителем.



Показания

В КАБИНЕТЕ

Контурирование, финирирование, полировка и суперполировка композитных реставраций

- Контурирование – черный диск Super-Snap (крупнозернистый)
- Финирирование – фиолетовый диск Super-Snap (среднезернистый)
- Полировка – зеленый диск Super-Snap (мелкозернистый)
- Суперполировка – красный диск Super-Snap (сверхмелкозернистый)

Для финирирования и полировки интерпроксимальных участков используйте полоски Super-Snap Polystrips.

Металл в середине отсутствует

Это исключает образование выемок и дисколорации на композитных реставрациях и зубной эмали



Тонкие гибкие диски

Под давлением они гнутся, но не ломаются. Поэтому с их помощью проще обрабатывать интерпроксимальные участки

Силиконовая защита для хвостовика

Эластичное крепление для хвостовика позволяет легко установить диск на мандрель

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверхтонкие и сверхгибкие инструменты

В середине отсутствует металл

Продуманная система для контурирования, финирирования и полирования в 4 этапа

Тщательно подобранные полировочные полоски для интерпроксимальных участков

Исключается образование выемок на эмали и реставрациях

Надежная фиксация диска на мандрели (максимальный контроль в процессе полировки)



Об./мин. Реком.: 10 000-12 000 / макс: 15 000 / УН: 0,3-0,6 Н

■ Диски Super-Snap

На дисках Super-Snap предусмотрены эластичные фиксаторы, с помощью которых диск можно легко установить на мандрель. Они выпускаются без металла в середине, что исключает образование выемок и дисколорации на композитных реставрациях и эмали. Так как диски – тонкие и гибкие, они гнутся, но не ломаются, и обрабатывать интерпроксимальные участки с их помощью проще.






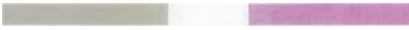

Диски выпускаются с нерабочей стороной вниз,

нерабочей стороной вверх и с двусторонним покрытием. Размеры: стандартный (Ø 12 мм) и мини (Ø 8 мм).

■ Полиштрипсы Super-Snap

В набор для полировки Super-Snap входят полировочные полоски, которые по зернистости соответствуют дискам такого же цвета.

Полоски прекрасно полируют поверхность и интерпроксимальные участки зубов.

	Контурирование	Финирирование	Полировка	Суперполировка						
Диски										
	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
	Черные (крупнозернистые)		Фиолетовые (среднезернистые)				Зеленые (мелкозернистые)		Красные (сверхмелкозернистые)	
Мандрели										
	0438		0439		0440					
	FG		CA		CA (смола)					
Полиштрипсы										
	L525				L526					
	Черные (крупнозернистые) / Фиолетовые (среднезернистые)				Зеленые (мелкозернистые) / Красные (сверхмелкозернистые)					

Номер	Кол-во	Изделие
Super-Snap		
0500	1 шт.	Super-Snap Rainbow Technique Kit (набор), хвостовик CA (см. стр. 30)
0505	1 шт.	Super-Snap Mini-Kit (набор), хвостовик CA
L506	50 шт.	Диски Super-Snap, черные (крупнозернистые), безопасная поверхность - нижняя
L507	50 шт.	Мини-диски Super-Snap, черные (крупнозернистые), безопасная поверхность – нижняя
L508	50 шт.	Диски Super-Snap, фиолетовые (среднезернистые), безопасная поверхность – нижняя
L509	50 шт.	Диски Super-Snap, фиолетовые (среднезернистые), безопасная поверхность - верхняя
L528	50 шт.	Диски Super-Snap, фиолетовые (среднезернистые), с двусторонним покрытием
L522	50 шт.	Мини-диски Super-Snap, фиолетовые (среднезернистые), с двусторонним покрытием
L501	50 шт.	Диски Super-Snap, зеленые (мелкозернистые), с двусторонним покрытием
L519	50 шт.	Мини-диски Super-Snap, зеленые (мелкозернистые), с двусторонним покрытием
L502	50 шт.	Диски Super-Snap, красные (сверхмелкозернистые), с двусторонним покрытием
L521	50 шт.	Мини-диски Super-Snap, красные (сверхмелкозернистые), с двусторонним покрытием
L525	100 шт.	Полиштрипсы Super-Snap, черные / фиолетовые (крупно- / среднезернистые)
L526	100 шт.	Полиштрипсы Super-Snap, зеленые / красные (мелко- / сверхмелкозернистые)

Номер	Кол-во	Изделие
Super-Snap X-Treme		
0508	1 шт.	Super-Snap X-Treme Technique Kit (набор), хвостовик CA (см. стр. 30)
0506	1 шт.	Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit (набор), зеленые и красные диски Super-Snap X-Treme – по 50
0507	1 шт.	Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit (набор), зеленые и красные минидиски Super-Snap X-Treme – по 50
L511	50 шт.	Диски Super-Snap X-Treme, зеленые (мелкозернистые), с двусторонним покрытием
L512	50 шт.	Диски Super-Snap X-Treme, красные (сверхмелкозернистые), с двусторонним покрытием
L531	50 шт.	Мини-диски Super-Snap X-Treme, зеленые (мелкозернистые), с двусторонним покрытием
L532	50 шт.	Мини-диски Super-Snap X-Treme, красные (сверхмелкозернистые), с двусторонним покрытием
Мандрели		
0438	6 шт.	Мандрели FG *
0439	6 шт.	Мандрели CA, сталь
0440	100 шт.	Мандрели CA, смола

* Пользуйтесь хвостовиками под турбинный наконечник, только если есть низкоскоростной мотор с соответствующим фиксатором.

Диски Super-Snap, Super-Snap X-Treme и полиштрипсы – одноразовые.



Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme (Продолжение. Начало – на стр. 29)


полировка композитов с микро- и гибридным наполнителем

■ Диски Super-Snap X-Treme

Диски Super-Snap X-Treme – это усовершенствованная версия зеленых и красных дисков Super-Snap. Они более плотные и поэтому во время полировки создают большее усилие нажима. Во время обработки интерпроксимальных участков диски сохраняют свою мягкость, но при этом отличаются большим сроком службы и прочностью.

Впервые красные диски Super-Snap X-Treme выпускаются с современной функцией трехмерной полировки. Поскольку зерна из оксида алюминия имеют форму полусферы, дебрис проходит между ними, а инструмент остается чистым и оставляет меньше царапин.

Диски Super-Snap X-Treme (стандартные и мини) выпускаются с двухсторонним покрытием.

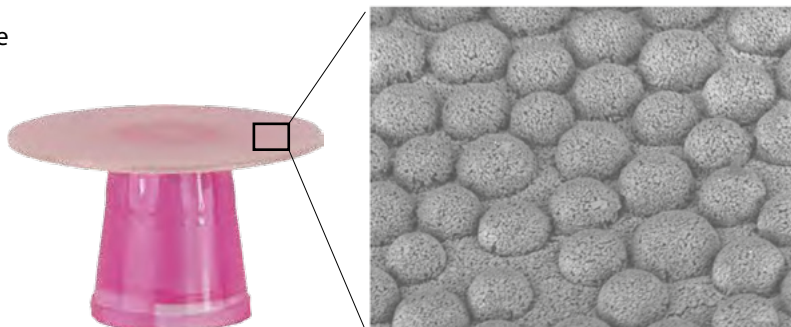

L D3,1 x400 200 мкм



Набор Super-Snap Rainbow Technique Kit

В набор входят 180 дисков с четырьмя типами зернистости (100 стандартных и 80 – мини), 40 полиштрипов, 2 камня Dura-White (CN1 и FL2), 1 мидиконус CompoSite Fine и 4 стальные мандрели под угловой наконечник.



Набор Super-Snap X-Treme Technique Kit

В набор входят 160 дисков с четырьмя типами зернистости (80 Super-Snap и 80 Super-Snap X-Treme), 40 полиштрипов, 2 камня Dura-White (CN1 и FL2), мидиконус CompoSite и CompoSite Fine – по 2, и 4 стальные мандрели под угловой наконечник.



Мини-набор Super-Snap Mini-Kit

В набор входят 48 дисков со всеми вариантами зернистости (32 – стандартных, 16 – мини), 1 мидиконус CompoSite Fine и 1 мандрель под угловой наконечник.



Наборы дисков Super-Snap X-Treme Disk Kits

В набор стандартных дисков Super-Snap X-Treme входят красные и зеленые стандартные диски – по 50 шт., а в набор мини-дисков Super-Snap X-Treme – красные и зеленые мини-диски, по 50 шт.