

# OneGloss M

## MOUNTED

Twee-in-een-polijster  
voor composiet



# Afwerken en polijsten met

De twee-in-een-polijstrubbers met aluminiumoxide zijn het ideale instrument voor de afwerking van alle soorten composiet-restauraties. U hoeft alleen maar de contactdruk aan te passen en dat gaat heel snel en gemakkelijk, vanaf de eerste bewerkingstap tot aan het polijsten.

- De polijstrubbers OneGloss M zijn gemonteerd op een roestvrijstalen mandrel voor gebruik met een hoekstuk en kunnen gesteriliseerd worden
- Afwerken met hoge drukkracht (ca. 1,0 N)
- Polijsten met lichte drukkracht (ca. 0,3 N)
- Verwijderen van overtollig composiet of cement en polijsten van glazuur met matige tot lichte drukkracht
- Polijsten van glazuur na het verwijderen van brackets en tandsteen of voor het verwijderen van verkleuringen, met lichte drukkracht
- Aanbevolen toerentalbereik  $3.000 \text{ min}^{-1}$  tot  $10.000 \text{ min}^{-1}$  met intermitterende waternevel; het maximaal toegestane toerental van  $15.000 \text{ min}^{-1}$  mag niet worden overschreden



# één instrument

## Diverse vormen

Het assortiment bestaat uit vier vormen die optimaal op de te bewerken tandvlakken zijn afgestemd.


### Cup

voor knobbels,  
incisaal en occlusaal



### Midi-Point

voor labiaal, linguaal,  
buccaal en occlusaal

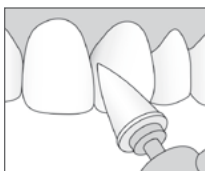


### Mini-Point

voor fissuren en  
cervicaal



### IC

voor labiaal, linguaal,  
buccaal en approximaal

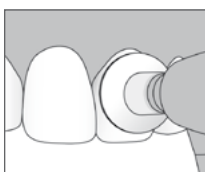

# Bestelinformatie

## OneGloss M

met mandrel voor gebruik met hoekstuk, 12 st. per verpakking



**Vorm: Mini-Point**

Bestelnr. 0186



**Vorm: Cup**

Bestelnr. 0187



**Vorm: Midi-Point**

Bestelnr. 0188



**Vorm: IC**

Bestelnr. 0189



**SHOFU DENTAL GmbH**

Am Brüll 17 · 40878 Ratingen / Duitsland  
Tel.: +49 (0) 2102 / 8664 - 0 · Fax: +49 (0) 2102 / 8664 - 64  
info@shofu.de · www.shofu.de