


Diamants TPE

Fraises diamantées à leur extrémité pour la préparation d'épaulement sous-gingival

Ces fraises particulières présentent une surface de coupe protégée par un chanfrein lisse afin d'éviter la lacération des tissus adjacents ou la formation de contre-dépouille lors de la préparation d'épaulement. Les TPE Diamonds (**T**issue-**P**rotective, **E**nd-Cutting) sont disponibles en taille standard à gros ou grain fin et, en taille courte, à gros grain.

Réf.	680C-1	680F-1	682C-1	682F-1	682S-1	684C-1	684F-1	684S-1	686C-1	686F-1
ISO N°	010	010	012	012	012	014	014	014	016	016
Longueur de tête (mm)	9,0	9,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0
Diamètre (mm)	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6

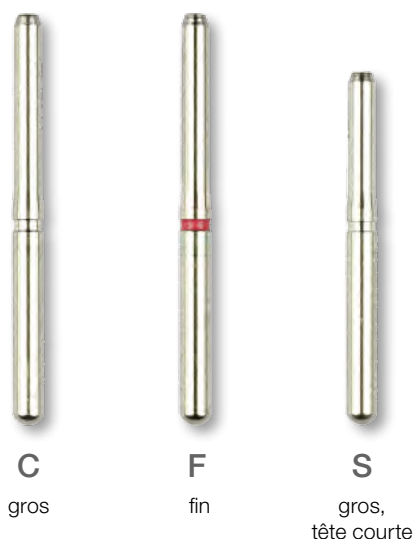

AVANTAGES

- Extrémité fraisante protégée pour préserver les tissus
- Centrage parfait
- Longue durée de vie
- Efficacité constante

Indications

AU CABINET

- Gros (C - sans marque) :
Pour la réduction rapide de la limite d'épaulement dans le sulcus gingival
- Fin (F - bague rouge) :
Pour la finition douce de la limite d'épaulement y compris si elle est sous-gingivale


La fraise courte (à gros grain) sert en cas d'accès difficile.

Champ d'application

Préparation d'épaulement sur émail naturel



Le TPE Diamonds Kit contient une sélection de neuf fraises.

 **Min⁻¹** Rec. 300.000 - 450.000 / PU 0 - 0,8 N

Réf.	Quantité	Produit
680C-1- 686F-1	6 pces	TPE Diamonds, tige FG
0688	1 pce	TPE Diamonds Kit