


BEAUTIFIL Flow Plus

Composite de relleno inyectable para la zona dental anterior y posterior

Beautifil Flow Plus combina las propiedades de aplicación de un fluido con la estabilidad, la durabilidad y la estética de los composites híbridos condensables. Está indicado para todas las aplicaciones, incluidas las superficies oclusales y los márgenes proximales. Gracias a unas propiedades de manipulación mejoradas que solo permiten la aplicación con jeringa, nunca fue tan fácil crear restauraciones de los dientes posteriores. Además, la capacidad de liberar y recargar flúor y la resistencia a la colonización bacteriana reducen la aparición de caries recurrentes.

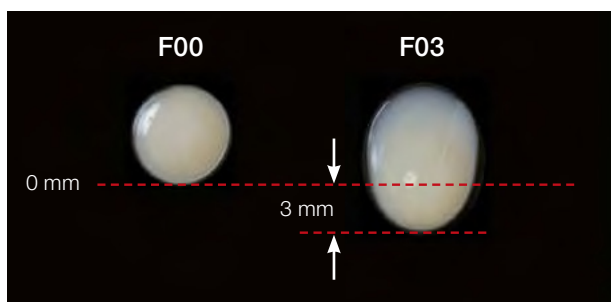

Beautifil Flow Plus está disponible en dos tipos de viscosidad: la «F00», extremadamente estable, y la «F03» con una fluidez moderada. Las dos pueden utilizarse para las indicaciones fluidas («Flow»), pero también para los tratamientos de relleno en la zona dental anterior y posterior, lo que incluye las restauraciones de clase I y clase II en zonas con oclusión. Gracias al mango que gira 360 ° y a la fina cánula intercambiable, los composites Flow Plus pueden aplicarse directamente y sin complicaciones con las jeringas.

Disponemos de una amplia gama de colores y diferentes niveles de opacidad para restauraciones estéticas con la técnica monocromática y policromática.

VENTAJAS

- Restauración de cavidades de la clase I hasta V
- Elevado límite de elasticidad y resistencia a la flexión
- Permite el uso de la técnica de cono («Cone Technique»)
- Estética natural con efecto camaleón
- Liberación y recarga de flúor constante
- Extraordinaria radiopacidad

Ámbitos de aplicación

■ F00 – ZERO FLOW

Para formas de la anatomía oclusal, crestas marginales y detalles superficiales complejos; para restauraciones de todas las clases de cavidades

■ F03 – LOW FLOW

Para restauración de fisuras y defectos cercanos a la encía; aplicación como revestimiento de base





F00 - extremadamente estable (Zero Flow)

Color	Ref. 2,2 g	Color	Ref. 0,21 g
JERINGA		TIPS, 20 uds.	
A1	2001	A1	2201
A2	2002	A2	2202
A3	2003	A3	2203
A3,5	2004	A3,5	2204
A4	2005	A4	2205
B1	2062	B1	2206
B2	2063	B2	2207
C2	2064	C2	2208
D2	2065	D2	2209
SA0,5	2000	SA0,5	2200
SA0,50 (opaco A0,5)	2006	SA0,50 (opaco A0,5)	2211
A10 (opaco A1)	2007	A10 (opaco A1)	2212
A20 (opaco A2)	2008	A20 (opaco A2)	2213
Inc (Incisal)	2010	Inc (Incisal)	2215
BW (Bleaching White)	2011	BW (Bleaching White)	2216

F03 - fluidez moderada (Low Flow)

Color	Ref. 2,2 g	Color	Ref. 0,21 g
JERINGA		TIPS, 20 uds.	
A1	2014	A1	2219
A2	2015	A2	2220
A3	2016	A3	2221
A3,5	2017	A3,5	2222
A4	2018	A4	2223
B1	2066	B1	2224
B2	2067	B2	2225
C2	2068	C2	2226
D2	2069	D2	2227
SA0,5	2013	SA0,5	2218
A20 (opaco A2)	2020	A20 (opaco A2)	2229
A30 (opaco A3)	2021	A30 (opaco A3)	2230
Inc (Incisal)	2023	Inc (Incisal)	2232
BW (Bleaching White)	2024	BW (Bleaching White)	2233
MI (Milky)	2026	MI (Milky)	2235
CV (Cervical)	2027	CV (Cervical)	2236

Standard Kit



Standard Kit

- 2 jeringas de 2,2 g Beautifil Flow Plus F00 y 2 de F03, colores A2 y A3
- accesorios

Ref.	Cantidad	Producto
2000S	1 ud.	Beautifil Flow Plus Standard Kit
2001-2069	2,2 g	Beautifil Flow Plus - jeringa
2201-2236	0,21 g	Beautifil Flow Plus - Tips, 20 uds.