


# DirectDia Paste

Pasta de pulido con diamantes para un pulido de alto brillo intraoral y extraoral

La pasta DirectDia contiene hasta un 20 % de partículas de diamante con un tamaño de grano de 2-4  $\mu\text{m}$ . En poco tiempo se consigue un alto brillo perfecto en el esmalte dental natural y en todos los materiales de restauración (cerámica, composites de revestimiento y de relleno, metales, etc.). La pasta tiene un agradable sabor a lima y es fácil de detectar en la boca de los pacientes gracias a su ligero color verde.



Una cantidad mínima para un diente

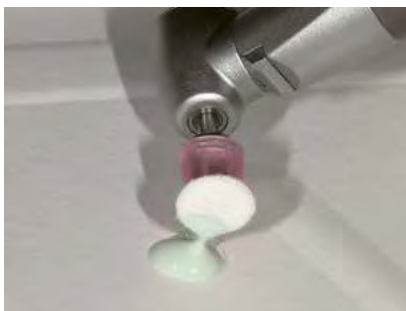

Uso del Super-Snap Buff Disk



Ligero color verde para una fácil detección

## Ámbitos de aplicación

- Eliminación de las decoloraciones y pulido de alto brillo de todos los materiales de restauración
- Eliminación de la placa dental y pulido final de los dientes naturales

Ref.	Cantidad	Producto
0558	1 jeringa	DirectDia Paste, 3 g 2 puntas con tapa

## info

Para la aplicación se recomiendan los Super-Snap Buff Disks y los Buff Mini-Disks como instrumento de soporte. Los discos de fieltro flexibles permiten una efectiva aplicación y llegan a todas las zonas de los dientes naturales.

Para evitar las salpicaduras o que se genere un calor excesivo, los instrumentos giratorios deben utilizarse con una velocidad inferior a 10.000 rpm.

No es necesario que la superficie esté seca. A continuación, enjuagar simplemente con agua.

## VENTAJAS

Ligero color verde para una fácil detección en la boca

Dosificación exacta gracias a la punta de aplicación

Viscosidad proporcionada para una fácil manipulación

Agradable sabor a lima

