

# Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme

Para el pulido de composites microrellenos e híbridos

El sistema de pulido Super-Snap y Super-Snap X-Treme está formado por discos y bandas de pulido revestidos que se utilizan para el pulido de composites microrellenos e híbridos.



## Ámbitos de aplicación

### EN LA CLÍNICA DENTAL

Contorneado, acabado y pulido hasta el alto brillo de restauraciones de composite

- Contorneado: disco Super-Snap negro (grano grueso)
- Acabado: disco Super-Snap violeta (grano medio)
- Pulido: disco Super-Snap verde (grano fino)
- Alto brillo: disco Super-Snap rojo (grano extrafino)

Para el acabado y el pulido de las zonas interproximales se utilizan las bandas de pulido Super-Snap.

## Sin núcleo metálico

Evita los daños y la decoloración de los composites y del tejido dental duro



## Discos finos y flexibles

Se doblan sin romperse y permiten un fácil acceso a las zonas proximales

## Protección del mango de silicona

El soporte elástico permite una fácil colocación en el mandril

## VENTAJAS

Extremadamente finos y flexibles

Sin núcleo metálico

Sistema continuo: desde el contorneado hasta el alto brillo en cuatro pasos

Bandas de pulido adaptadas para las zonas interdentes

No araña el tejido dental duro ni la restauración

Sujeción del disco estable sobre el mandril (máximo control durante el pulido)




**Rpm** Recom. 10.000 - 12.000 / Máx. 15.000 /  
Presión de contacto 0,3 - 0,6 N

## ■ Discos Super-Snap

Los discos Super-Snap están previstos con soportes elásticos que se colocan sobre el mandril. Dado que no tienen núcleo metálico, evitan provocar daños y decoloración por descuido en el composite y el tejido dental duro. Los finos discos son flexibles, se doblan sin romperse y permiten un fácil acceso a las zonas proximales. Se suministran revestidos por el lado frontal, por el lado del mango y por los dos lados, y en el tamaño estándar (ø 12 mm) y mini (ø 8 mm).

## ■ Bandas de pulido Super-Snap

El sistema de pulido Super-Snap incluye las bandas de pulido adaptadas disponibles con el mismo grano y revestimiento que los discos. Con ellas se puede conseguir un acabado y un pulido de las superficies óptimo, también en la zona interdental.

	Contorneado		Acabado				Pulido		Alto brillo		
Discos								L501	L519	L502	L521
							L511	L531	L512	L532	
	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L511	L531	L512	L532	
	Negro (grueso)		Violeta (medio)				Verde (fino)		Rojo (extrafino)		
Mandriles											
	0438			0439			0440				
	FG			CA			CA (plástico)				
Bandas de pulido											
	L525						L526				
	Negro (grueso) / Violeta (medio)						Verde (fino) / Rojo (extrafino)				

Ref.	Cantidad	Producto
<b>Super-Snap</b>		
0500	1 ud.	Super-Snap Rainbow Technique Kit, mango CA (ver pág. 30)
0505	1 ud.	Super-Snap Mini-Kit, mango CA
L506	50 uds.	Discos Super-Snap, negro (grueso), lado frontal revestido
L507	50 uds.	Minidiscos Super-Snap, negro (grueso), lado frontal revestido
L508	50 uds.	Discos Super-Snap, violeta (medio), lado frontal revestido
L509	50 uds.	Discos Super-Snap, violeta (medio), lado del mango revestido
L528	50 uds.	Discos Super-Snap, violeta (medio), ambos lados revestidos
L522	50 uds.	Minidiscos Super-Snap, violeta (medio), ambos lados revestidos
L501	50 uds.	Discos Super-Snap, verde (fino), ambos lados revestidos
L519	50 uds.	Minidiscos Super-Snap, verde (fino), ambos lados revestidos
L502	50 uds.	Discos Super-Snap, rojo (extrafino), ambos lados revestidos
L521	50 uds.	Minidiscos Super-Snap, rojo (extrafino), ambos lados revestidos
L525	100 uds.	Bandas de pulido Super-Snap, negro / violeta (grueso / medio)
L526	100 uds.	Bandas de pulido Super-Snap, verde / rojo (fino / extrafino)

Ref.	Cantidad	Producto
<b>Super-Snap X-Treme</b>		
0508	1 ud.	Super-Snap X-Treme Technique Kit, mango CA (ver pág. 30)
0506	1 ud.	Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit, 50 discos Super-Snap X-Treme verdes y 50 rojos
0507	1 ud.	Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit, 50 discos Super-Snap X-Treme verdes y 50 rojos
L511	50 uds.	Discos Super-Snap X-Treme, verde (fino), ambos lados revestidos
L512	50 uds.	Discos Super-Snap X-Treme, rojo (extrafino), ambos lados revestidos
L531	50 uds.	Minidiscos Super-Snap X-Treme, verde (fino), ambos lados revestidos
L532	50 uds.	Minidiscos Super-Snap X-Treme, rojo (extrafino), ambos lados revestidos
<b>Mandriles</b>		
0438	6 uds.	mandril FG *
0439	6 uds.	mandril CA, acero
0440	100 uds.	mandril CA, plástico

\* Elegir el mango FG solo cuando se disponga de un accionamiento de marcha lenta con soporte FG.

Los discos y las bandas de pulido Super-Snap y Super-Snap X-Treme son artículos desechables.


# Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme (continúa de la página 29)

Para el pulido de composites microrellenos e híbridos

## ■ Discos Super-Snap X-Treme

Los discos de pulido Super-Snap X-Treme, una evolución de los discos Super-Snap verdes y rojos, son más gruesos y permiten una mayor presión de contacto durante el pulido. Destacan por su larga durabilidad y por una mayor firmeza, sin perder su ya conocida flexibilidad en la zona interproximal.

Los discos Super-Snap X-Treme rojos presentan por primera vez un innovador revestimiento 3-D. Los residuos del pulido se depositan entre las semiesferas de partículas de óxido de aluminio repartidas de forma homogénea y son conducidos hacia fuera. De esta manera se garantiza que el polvo del pulido no se acumule ni se apelmace en la superficie de abrasión, evitando así los posibles arañazos posteriores.

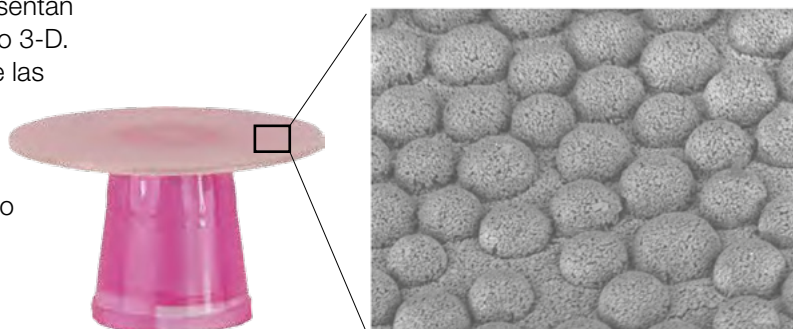

L D3,1 x400 200 µm

Los discos Super-Snap X-Treme (diámetro mini y estándar) están revestidos por los dos lados.



El Super-Snap Rainbow Technique Kit incluye discos complementarios con diferentes granos. Incluye 180 discos (100 uds. estándar / 80 uds. mini), 40 bandas de pulido, 2 piedras Dura-White (CN1 y FL2), 1 midipunta CompoSite Fine y 4 mandriles para contra-ángulo.



El volumen de suministro del Super-Snap X-Treme Technique Kit contiene un total de 160 discos con cuatro granos diferentes (80 uds. Super-Snap / 80 uds. Super-Snap X-Treme), 40 bandas de pulido, 2 piedras Dura-White (CN1 y FL2), 2 midipuntas CompoSite y 2 midipuntas CompoSite Fine, así como 4 mandriles para contra-ángulo.



El Super-Snap Mini-Kit incluye discos con todos los granos disponibles: 48 discos (32 uds. estándar / 16 uds. mini), 1 midipunta CompoSite Fine y 1 mandril para contra-ángulo.



El Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit contiene 50 discos estándar verdes y 50 rojos. En el Super-Snap X-Treme Mini-Disk Kit hay 50 discos de pulido mini verdes y 50 rojos.