


Diamantes TPE

Diamantes protectores del tejido aplicados en la punta para la preparación del hombro subgingival

Estos diamantes de preparación se caracterizan por el canto biselado y sin revestimiento de la superficie abrasiva, que evita dañar el tejido colindante o un corte inferior de la pared axial durante la preparación del hombro. Los diamantes TPE (del inglés «Tissue-Protective, End-Cutting») están disponibles con tamaño de la cabeza normal en grano fino y grueso, y con cabeza corta en grano grueso.

Ref.	680C-1	680F-1	682C-1	682F-1	682S-1	684C-1	684F-1	684S-1	686C-1	686F-1
N.º ISO	010	010	012	012	012	014	014	014	016	016
Cabeza (mm) *	9,0	9,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0
Diámetro (mm)	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6

* Longitud de la cabeza: in mm

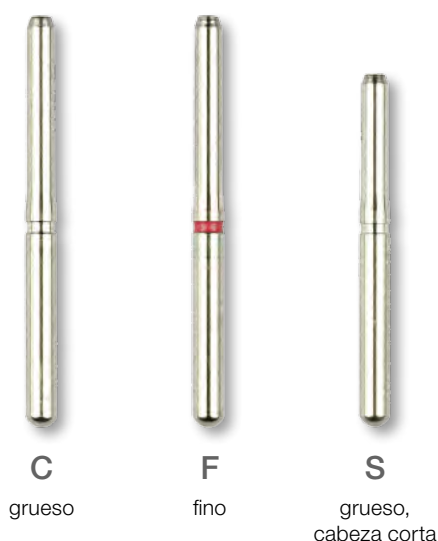

VENTAJAS

- Protección del tejido gracias al revestimiento del diamante solo en la punta
- Centrado preciso
- Gran durabilidad
- Potencia de abrasión constante

Ámbitos de aplicación

EN LA CLÍNICA DENTAL

- Grueso (C - sin marca en el mango): reducción rápida del margen del hombro en el surco gingival
 - Fino (F - marca roja en el mango): Acabado fino del hombro, acabado de la preparación del hombro subgingival
- La cabeza corta (con grano grueso) se recomienda para las preparaciones en puntos de difícil acceso.

Usos

Tejido dental duro: preparación del hombro



El TPE Diamonds Kit contiene nueve diamantes seleccionados.

Rpm Recom. 300.000 - 450.000 / PC 0 - 0,8 N

Ref.	Cantidad	Producto
680C-1-686F-1	6 uds.	Diamantes TPE, mango FG
0688	1 ud.	TPE Diamonds Kit