



BEAUTIFIL Flow Plus X

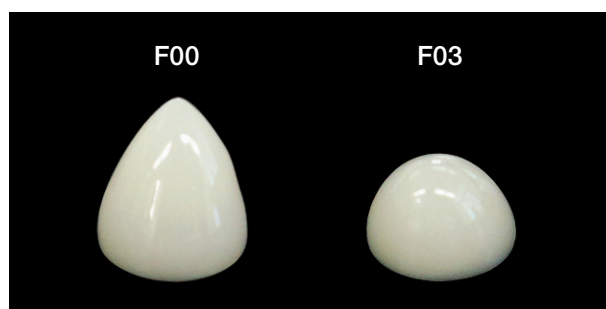

Injizierbares Hybridkomposit in zwei Viskositäten

Das belastbare Füllungskomposit für Front- und Seitenzahnbereich ermöglicht direkte Restaurationen mit exzellenter Selbstnivellierung und hervorragenden physikalischen Eigenschaften, die denen konventioneller Hybridkomposite in nichts nachstehen. Beautifil Flow Plus X fördert aufgrund der integrierten S-PRG-Nanofüller nicht nur die Remineralisation der angrenzenden Zahnschubstanz und sorgt so nachhaltig für eine kariesprotektive Füllungstherapie, es überzeugt auch durch seine ausgezeichnete Polierbarkeit und einen beständigen Glanz. Es ist in den beiden unterschiedlichen Viskositäten F00 und F03 erhältlich – zum restaurativen Aufbau und zum Füllen.

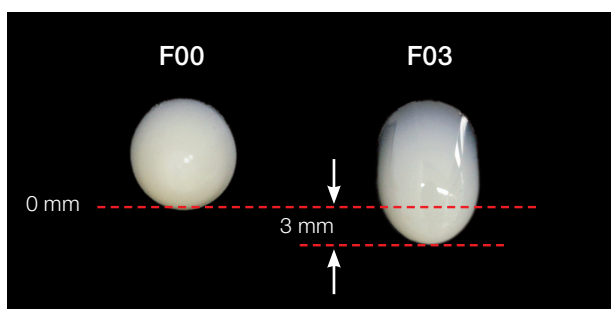

Die Abbildungen zeigen das unterschiedliche Fließverhalten beider Pasten auf einer senkrecht gestellten (links) bzw. waagerechten Mischplatte, jeweils nach einer Minute.

Anwendungsbereiche

■ F00 – ZERO FLOW

Exzellente Formbeständigkeit, idealer Füllungsaufbau: Die Fließfähigkeit von F00 ist so gering, dass sich das Material bei der Schichtung nicht verformt. Mit diesem leicht zu verarbeitenden Komposit ist die okklusale Morphologie mit Randleisten und Höckern einfach und detailgetreu restaurierbar. Sein Vorteil: Es fließt leicht bei der Applikation, bleibt aber nach dem Ausformen standfest.

■ F03 – LOW FLOW

Mittlere Formbeständigkeit und Viskosität sowie präzises Anfließverhalten: Das sich selbstnivellierende F03 benetzt vollständig die Kavitätenwände und ist daher perfekt zum Füllen geeignet – ob für die erste Schicht auf dem Kavitätenboden, zur Füllung kleiner okklusaler Kavitäten oder für Zahnhalsfüllungen.

VORTEILE

- Komplettsystem für alle konservierend-restaurativen Indikationen
- Erleichtertes Handling bei direkter Applikation
- Kompatibel mit allen konventionellen Bondings
- Umfangreiche Farbpalette für ästhetische Restaurationen
- Optimale Polierbarkeit und dauerhafter Glanz

Okklusale Füllung eines Molaren



Präparierte Kavität



Kavitätenlining mit F03



Aufbau der Höckergrate mit F00



Okklusale Morphologie nach der Füllung



Postoperativ



F00 – absolut standfest (Zero Flow)

Farbe	Best.-Nr. 2,2 g	Farbe	Best.-Nr. 0,21 g
SPRITZE		TIPS, 20 St.	
A1	YE2301	A1	Y2401
A2	YE2302	A2	Y2402
A3	YE2303	A3	Y2403
A3,5	YE2304	A3,5	Y2404
A4	YE2305	A4	Y2405
B1	YE2306	B1	Y2406
B2	YE2307	B2	Y2407
C2	YE2308	C2	Y2408
D2	YE2309	D2	Y2409
SA0,5	YE2300	SA0,5	Y2400
SA0,50 (opakes A0,5)	YE2310	SA0,50 (opakes A0,5)	Y2410
A10 (opakes A1)	YE2311	A10 (opakes A1)	Y2411
A20 (opakes A2)	YE2312	A20 (opakes A2)	Y2412
Inc (Incisal)	YE2314	Inc (Incisal)	Y2414
BW (Bleaching White)	YE2315	BW (Bleaching White)	Y2415



F03 – moderat fließfähig (Low Flow)

Farbe	Best.-Nr. 2,2 g	Farbe	Best.-Nr. 0,21 g
SPRITZE		TIPS, 20 St.	
A1	YE2321	A1	Y2421
A2	YE2322	A2	Y2422
A3	YE2323	A3	Y2423
A3,5	YE2324	A3,5	Y2424
A4	YE2325	A4	Y2425
B1	YE2326	B1	Y2426
B2	YE2327	B2	Y2427
C2	YE2328	C2	Y2428
D2	YE2329	D2	Y2429
SA0,5	YE2320	SA0,5	Y2420
A20 (opakes A2)	YE2332	A20 (opakes A2)	Y2432
A30 (opakes A3)	YE2333	A30 (opakes A3)	Y2433
Inc (Incisal)	YE2334	Inc (Incisal)	Y2434
BW (Bleaching White)	YE2335	BW (Bleaching White)	Y2435
MI (Milky)	YE2336	MI (Milky)	Y2436
CV (Cervical)	YE2337	CV (Cervical)	Y2450



Best.-Nr.	Menge	Produkt
2000X	1 St.	Beautifil Flow Plus X Standard Kit je 1 Spritze à 2,2 g: Beautifil Flow Plus X F00 und F03, Farbe A2 und Beautifil Flow Plus X F00 und F03, Farbe A3
YE2303S	1 St.	Beautifil Flow Plus X 4-Spritzen Kit F00 je 2 Spritzen à 2,2 g Beautifil Flow Plus X F00, Farbe A2 und A3
YE2323S	1 St.	Beautifil Flow Plus X 4-Spritzen Kit F03 je 2 Spritzen à 2,2 g Beautifil Flow Plus X F03, Farbe A2 und A3
YE2300- YE2337	2,2 g	Beautifil Flow Plus X - Spritze
YE2400- YE2450	0,21 g	Beautifil Flow Plus X - Tips, 20 St. *
Y2351	50 St.	Spritzenaufsatz 20 G-L für Beautifil Flow Plus X

* erhältlich ab Sommer 2019